





VOCO – OS DENTALISTAS

A medicina dentária moderna requer materiais de altíssima qualidade e fácil manuseamento. O objectivo maior da VOCO é precisamente o de oferecer soluções eficientes e práticas, capazes de atender a estas exigências. Enquanto “dentistas”, ou seja, especialistas em materiais dentários, concentramo-nos exclusivamente neste campo de actividade e colocamo-nos com todo o afinho ao serviço da medicina dentária.

Desde 1981 a VOCO disponibiliza materiais dentários de elevada qualidade a profissionais do mundo inteiro, sendo hoje um dos fabricantes líderes mundiais do sector. Com uma gama de mais de 100 produtos, fornecemos ao médicos dentistas e laboratórios de próteses dentárias de mais de 120 países fármacos e materiais “made in Germany” para a medicina dentária preventiva, restauradora e protética.

Graças a um intenso trabalho de investigação e a um sistema certificado de garantia da qualidade, a VOCO estabelece continuamente novos paradigmas para a inovação no campo dos materiais dentários. Para tal, os investigadores da VOCO mantêm um intenso intercâmbio com mais de 150 universidades e instituições de investigação do mundo inteiro. A competência dos nossos cientistas é tida em alta conta, e a VOCO já participou na coordenação de diversos projectos realizados pelo Ministério da Ciência e da Educação da Alemanha (BMBF).

Com o lançamento dos seus produtos inovadores, a VOCO foi pioneira no segmento dentário por diversas vezes. Grandio®, o primeiro compósito nano-híbrido do mundo, é disso um exemplo. Em virtude das suas excelentes propriedades físicas e de manuseamento, este material tornou-se um dos materiais de restauração mais usados em todo o mundo. Já o Grandio®SO, o compósito nano-híbrido da VOCO para todas as classes de cavidades, é um dos materiais de restauração cujos parâmetros físicos mais se assemelham aos do dente natural.

A oferta de produtos da VOCO abrange: materiais provisórios e definitivos, de diferentes classes, para restaurações e bases cavitárias; adesivos e materiais de cimentação; espigões intra-radulares e sistemas para a reconstrução de cotos; materiais de impressão; materiais para a confecção de coroas e pontes provisórias; selantes de fissuras; preparados para a fluoretação tópica e a dessensibilização dentinária, bem como produtos e equipamentos de laboratório.

Descubra o novo catálogo – nele encontrará o actual portefólio de produtos da VOCO e inúmeras sugestões úteis para o seu trabalho no dia-a-dia.



ORAL CARE

Dessensibilizantes

Admira Protect	6
VOCO Profluorid Varnish	7
Bifluorid 10	8
Klint	9
Solvente	9

Selantes de fissuras

Fissurit FX	10
Fissurit F	10
Fissurit	10
Grandio Seal	11

Profilaxia

Remin Pro	12 / 13
-----------	---------

Branqueamento

Perfect Bleach Office	14
Perfect Bleach 10% / 17%	15

RESTAURAÇÕES DIRECTAS

Forros e bases cavitárias

Calcimol	18
Calcimol LC	18
Calcicur	18
Amalgam Liner	19
Ionobond	19
Ionoseal	19

Compósitos

Amaris	20 / 21
Amaris Flow	21
Amaris Gingiva	22
x-tra fil	23
GrandioSO	24
GrandioSO Flow	25
GrandioSO Heavy Flow	26
GrandTEC	27
Grandio	28 / 29
Grandio Flow	30
Curvy	31
Arabesk Top	32
Arabesk Flow	32
Arabesk	33
Polofil Supra	33
Alfacomp	33

Ormocer®

Admira	34
--------	----

Admira Flow	35
Admira Bond	35

Compómeros

Twinky Star	36
Glasiosite	36

Ionómeros de vidro

Ionolux	37
VOCO Ionofil Molar	38
VOCO Ionofil Molar AC	38
VOCO Ionofil Molar AC Quick	39
Easy Glaze	39
Ionofil Plus AC	40
Ionofil Plus	40
Aqua Ionofil Plus	40
Argion Molar AC	41
Argion	41
Final Varnish LC	41

Adesivos

Futurabond NR	42
Futurabond DC	43
Futurabond M	44
Solobond M	45
Solobond Plus	45

RESTAURAÇÕES INDIRECTAS

Cimentação

Bifix SE	48
Bifix QM	49
Fit Test C & B	50
Ceramic Bond	50
Meron Plus AC	51
Meron Plus	51
Aqua Meron	52
Meron	52

Reconstrução de cotos

Rebilda Post	53
Rebilda Post System	53
Rebilda DC	54
Rebilda SC	55
Rebilda LC	55

Provisórios

Structur Premium	56
Structur 2	57
Provicol QM	58
Provicol C	58
Provicol	58
Clip	59
Clip F	59

Rebasamento

Ufi Gel hard C	60
Ufi Gel hard	60
Ufi Gel SC	61
Ufi Gel P	61

Reparações

Cimara	62
Cimara Zircon	63

Impressão

Contrast putty/putty soft	64
Contrast medium/light	64
Registrado X-tra	65
Individo Lux	65
Profibase	65

Fixação de attachments

Quick Up	66
----------	----

PRODUTOS DIVERSOS

Aparelhos

Celalux 2	68
Individo Light Box	69
VOCO Mix 10	69

Limpeza

Traypuro tabs	70
Traypuro	70
Solvitan	70

Outros

Vococid	71
Depulpin	71
Canason	72
Caries Marker	72
Pele Tim	73
Block Out Gel LC	73
Rebilda Form	74

Pequenos aparelhos

Dimanto	75
Caps Dispenser	76
Dispensador tipo 2	76
Dispensador tipo 3	76
AC Activator	76
AC Applicator	76

Artigos descartáveis

Artigos descartáveis	77 / 78
----------------------	---------

Índice alfabético	79
-------------------	----



A close-up photograph of a dental procedure. A dental professional is using a thin, dark metal instrument, likely a scaler or explorer, to work on a patient's teeth. The patient's tongue is visible in the foreground, partially obscuring the view. The teeth are white and appear to be in good health. The background is a solid white color.

ORAL CARE

Oral Care – produtos da VOCO para dessensibilização, fluoretação tópica, profilaxia e branqueamento.

A VOCO oferece-lhe um amplo leque de preparados contendo flúor para o tratamento profilático, entre os quais selantes de fissuras e vernizes fluoretados de aplicações diversas. Uma série completa para o branqueamento dentário, quer para uso profissional, quer para uso caseiro, complementa a linha de produtos Oral Care.

Admira Protect



Verniz dessensibilizante e protector, fotopolimerizável, à base de Ormocer®

Indicações

- Tratamento da hipersensibilidade dentinária
- Tratamento de áreas cervicais e margens de coroas
- Tratamento de áreas cervicais após a profilaxia e a destartarização

Vantagens

- Biocompatível
- Eliminação permanente da hipersensibilidade
- Adesão segura
- Tecnologia de partículas de carga especial para uma alta resistência à abrasão
- Liberta flúor

Admira Protect nas práticas SingleDose

- Fácil, rápido e higiénico
- Não necessita de suportes adicionais
- Não entorna, não escorre



Apresentação

REF 1650 frasco 4,5 ml, acessórios

REF 1651 50 *SingleDose*, acessórios

REF 1652 200 *SingleDose*, acessórios

VOCO Profluorid Varnish



Verniz dessensibilizante dentário com flúor (5% NaF)

Indicações

- Tratamento da hipersensibilidade dentinária
- Selamento de túbulos dentinários em preparos cavitários ou superfícies radiculares hipersensíveis
- Tratamento das áreas cervicais após a profilaxia e a destartarização

Vantagens

- Verniz da cor do dente
- Fácil de aplicar – com excelente adesão mesmo em superfícies húmidas
- Agradável sabor a fruta
- Aplicação económica em camadas finas

VOCO Profluorid Varnish nas práticas SingleDose

- Fácil, rápido e higiénico
- Não necessita de suportes adicionais
- Não entorna, não escorre

Agora em três novos sabores!



Apresentação

REF 1267 tubo 10 ml

REF 2225	48 SingleDose (0,40 ml), sortidas
REF 1268	50 SingleDose (0,25 ml), melão
REF 1269	50 SingleDose (0,40 ml), melão
REF 2226	50 SingleDose (0,40 ml), caramelo
REF 2227	50 SingleDose (0,40 ml), cereja
REF 2228	50 SingleDose (0,40 ml), menta
REF 1271	200 SingleDose (0,40 ml), melão
REF 2229	200 SingleDose (0,40 ml), caramelo
REF 2230	200 SingleDose (0,40 ml), cereja
REF 2231	200 SingleDose (0,40 ml), menta

Bifluorid 10



Verniz de flúor para o tratamento da hipersensibilidade dentária

Indicações

Tratamento da hipersensibilidade, incluindo:

- Áreas cervicais e margens de coroas
- Sensibilidade após profilaxia profissional e destartarização
- Superfícies dentárias após preparação e / ou desgaste
- Superfícies oclusais desgastadas e dentes com gramplos
- Após lesões do esmalte (p. ex. fracturas, lascas)
- Selamento das margens de cavidades após restaurações, especialmente quando utilizada a técnica de ataque ácido
- Como protecção da dentina / forramento sob restaurações de amálgama

Vantagens

- Dessensibilização imediata
- Formação de uma camada protectora contra influências térmicas e mecânicas
- Transparente – não altera a cor dos dentes
- A base especial do verniz reforça o efeito de longo prazo e a incorporação profunda do flúor
- Económico e simples – largo campo de aplicação, baixo custo, aplicação rápida
- Seca rapidamente
- Não contém colofónia

Bifluorid 10 nas práticas SingleDose

- Fácil, rápido e higiénico
- Não necessita de suportes adicionais
- Não entorna, não escorre



Apresentação

REF 1615	set com 4 g Bifluorid 10, solvente 10 ml
REF 1616	frasco 10 g
REF 1617	embalagem grande com 3 x 10 g Bifluorid 10, solvente 10 ml, Pele Tim n.º1
REF 1032	solvente 10 ml

REF 1618	50 SingleDose, acessórios
REF 1619	200 SingleDose, acessórios

Klint



Pasta sem flúor para limpeza profissional e polimento dos dentes

Indicações

Remoção manual ou mecânica da placa

Limpeza dos dentes antes de procedimentos profiláticos contra a cárie, do tratamento da hipersensibilidade cervical e de restaurações a compósito

Vantagens

- Partículas de limpeza de um silicato especial
- Limpeza eficaz sem danificar o esmalte
- Sabor agradável a hortelã

Solvente



Solvente para Amalgam Liner e Bifluorid 10

Indicações

Diluição de vernizes e remoção de restos de verniz

Vantagens

- Também para limpar os instrumentos

Apresentação

REF 2336 tubo 60 g

Apresentação

REF 1032 frasco 10 ml

Fissurit FX



Selante de fissuras fotopolimerizável com elevado conteúdo de cargas inorgânicas, fluoretado, branco

Indicações

Selamento de fissuras e superfícies oclusais para a profilaxia da cárie

Selamento de fissuras estendidas

Restauração de pequenas cavidades

Vantagens

- Conteúdo de partículas de carga de 55% w/w para uma excelente resistência à abrasão
- Aplicação fácil e rápida usando a seringa de aplicação directa com cânulas de metal flexíveis
- Óptimas propriedades de fluidez
- Alta estabilidade e boa adesão ao esmalte
- Perfeita adaptação marginal
- Libertação contínua de flúor
- Cor branca para facilitar o controlo visual

Apresentação

REF 1181 seringas 2 x 2,5 g com cânulas de aplicação tipo 40

Fissurit F



Selante de fissuras fotopolimerizável, fluoretado, branco

Indicações

Selamento de fissuras e superfícies oclusais para a profilaxia da cárie

Selamento / preenchimento de superfícies de esmalte danificadas

Fixação de aparelhos ortodônticos

Selamento de restaurações de compósito ou cimento (protecção contra a humidade)

Restauração de pequenas lesões de cárie

Reparação de pequenos defeitos em restaurações a compósito ou amálgama

Vantagens

- Aplicação fácil e rápida com a nova seringa NDT®
- Cor branca para facilitar o controlo visual
- Excelentes propriedades de fluidez e baixa viscosidade
- Alta estabilidade e boa adesão ao esmalte
- Perfeita adaptação marginal
- Libertação contínua de flúor

Apresentação

REF 1180 frascos 2 x 3 ml
REF 1292 seringas 2 x 2 g com cânulas de aplicação tipo 40
REF 1293 set com seringas 5 x 2 g, 5 ml Vococid Gel, 2 x 3 ml Vococid líquido, acessórios

Fissurit



Selante de fissuras fotopolimerizável, transparente

Indicações

Ver Fissurit F

Vantagens

- Transparente
- Alta estabilidade e boa adesão ao esmalte
- Larga comprovação clínica

Apresentação

REF 1082 frascos 2 x 3 ml, transparente

Grandio® Seal



Selante de fissuras nano-híbrido, fotopolimerizável

Indicações

Selamento / restauração de fósulas e fissuras

Selamento / preenchimento de lesões superficiais em esmalte

Protecção das áreas de maior susceptibilidade à cárie durante tratamentos ortodônticos

Selamento de restaurações a compósito ou cimento (protecção contra a humidade)

Selamento de dentes decíduos

Vantagens

- Nanopartículas isoladas para óptima fluidez
- Com 70% w/w, o mais elevado conteúdo de carga da sua classe
- Extraordinárias propriedades físicas:
 - baixa abrasão
 - elevada resistência à flexão
 - contracção extremamente baixa
- Excelente manuseamento
- Óptimas propriedades de molhamento

Grandio® Seal na nova seringa NDT®

- NDT® significa Non-Dripping-Technology (tecnologia antigotejamento)
- Especial para materiais de alta fluidez
- Aplicação exacta e sem fugas
- Evita perdas de material

Selamento de fissuras com Grandio® Seal



fotopolimerização:
20 a 30 segundos

Fonte: Dr. Marcelo Balsamo

Apresentação

- REF 1060 seringas 5 × 2 g, Vococid Gel 5 ml, cânulas de aplicação tipo 45
- REF 1061 seringas 2 × 2 g, cânulas de aplicação tipo 45

Remin Pro



REMIN PRO – RECUPERAÇÃO PARA OS DENTES

Creme de protecção com hidroxiapatita, flúor e xilitol

- Selagem de lesões superficiais no esmalte com hidroxiapatita
- Aplicação única depois de restaurações, branqueamentos e limpezas
- Disponível nos sabores menta, melão e morango
- Para aplicação no consultório e em casa
- Cria uma sensação e um hálito agradável na boca



Remin Pro



voco

Remin Pro



Creme de protecção e higiene dentária com flúor e hidroxiapatita

Indicações

- Após o branqueamento dentário
- Após a profilaxia profissional
- Prevenção e controlo da hipersensibilidade dentinária
- Durante o tratamento ortodôntico

Vantagens

- Contém flúor (1.450 ppm de fluoreto de sódio), hidroxiapatita e xilitol
- Equilibra a flora bucal, protegendo os dentes contra a acção deletéria dos ácidos
- Fortalece os dentes após o branqueamento e a profilaxia
- Propriedades cariostáticas proporcionadas pelo xilitol
- Disponível em três sabores (melão, menta e morango)
- Pode ser aplicado diariamente, ideal para utilização em casa
- Aplicação fácil

Agora também em
SingleDose!



Apresentação

REF 2003	12 x 40 g tubos melão	REF 2126	50 x 2,5 g <i>SingleDose</i> melão
REF 2004	12 x 40 g tubos menta	REF 2127	50 x 2,5 g <i>SingleDose</i> menta
REF 2005	12 x 40 g tubos morango	REF 2128	50 x 2,5 g <i>SingleDose</i> morango
REF 2006	12 x 40 g tubos (4 x cada sabor: menta, melão e morango)		
REF 2007	3 x 40 g tubos (1 x cada sabor: menta, melão e morango)		

Perfect Bleach Office



Gel para o branqueamento de dentes manchados ou escurecidos (uso profissional)

Indicações

Perfect Bleach Office é um gel para o branqueamento dentário destinado exclusivamente ao uso profissional


Perfect Bleach Office é indicado para o branqueamento de um ou mais dentes vitais ou não vitais que apresentem alterações de cor

Vantagens

- Set completo para o branqueamento profissional em cinco pacientes
- Indicado tanto para o branqueamento externo quanto para o branqueamento interno
- Concentração de 27% de peróxido de hidrogénio para o branqueamento seguro e permanente das alterações de cor
- Perfect Bleach Office na prática seringa QuickMix:
 - Somente a quantidade necessária de gel é activada
 - Evita erros na mistura, aplicação imediata do gel recém-misturado
- Protector gengival à base de compósito (LC Dam)
- Fotopolimerização do protector gengival não é desagradável, pois não liberta calor

Caso clínico

Dr. Thalmann – Sequência convencional de um tratamento com Perfect Bleach Office utilizando o LC Dam para o isolamento da gengiva.

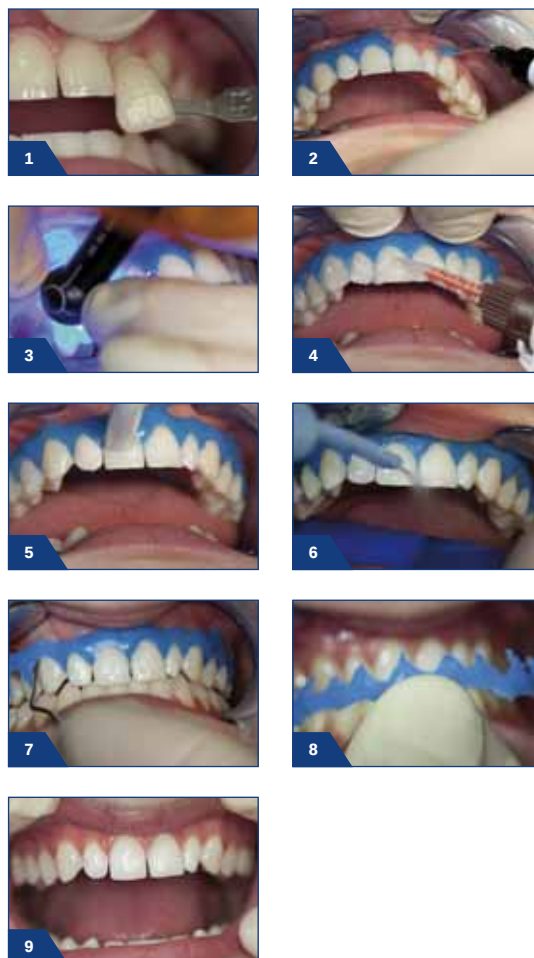

Apresentação

- | | |
|----------|---|
| REF 1667 | Office Set com 1 × 8 ml seringa QuickMix com gel branqueador, 5 × 1 g seringa LC Dam, pontas misturadoras tipo 14, pontas misturadoras tipo 15, pontas intra-orais tipo 1, cânulas de aplicação tipo 41 |
| REF 1668 | seringa QuickMix 1 × 8 ml gel branqueador, pontas misturadoras tipo 14 |
| REF 1655 | LC Dam 2 × 1 g seringa, cânulas de aplicação tipo 41 |

Perfect Bleach 10% / 17%



Gel para o branqueamento de dentes manchados ou escurecidos (10% / 17% de peróxido de carbamida)

Indicações

Branqueamento suave e permanente de dentes vitais e não vitais, p. ex. em casos de alterações de cor causadas por medicamentos, fluorose, alimentação, traumatismo, envelhecimento, etc.

Vantagens

- Aplicação simples e prática
- Não agride nem os tecidos dentários nem restaurações
- Efeito branqueador significativo depois de um curto tempo de tratamento
- Sabor agradável a hortelã
- Conjunto fornecido numa bonita nécessaire

Kit do paciente

A bonita nécessaire do kit contém quatro seringas de gel de branqueamento, um estojo de armazenamento e instruções de utilização ilustradas.

Especialmente recomendado para

- médicos dentistas que confeccionam as moldeiras de branqueamento num laboratório dentário externo
- pacientes que já possuem uma moldeira de branqueamento

Set

Além dos itens do kit do paciente, o set contém mais duas seringas de gel de branqueamento, bem como os materiais necessários para a confecção de duas moldeiras termoplastificadas (duas placas para plastificação a vácuo e Block Out Gel LC).

Especialmente recomendado para

- médicos dentistas que confeccionam as moldeiras de branqueamento no próprio consultório

Apresentação 10%

REF 1658	kit do paciente 4 x 2,4 ml seringas de gel branqueador com 10% de peróxido de carbamida, estojo de armazenamento, nécessaire
REF 1660	set com 6 x 2,4 ml seringas de gel branqueador com 10% de hidróxido de carbamida, 1,2 ml seringa Block Out Gel LC, 2 placas de plast. a vácuo, estojo de armazenamento, escala de cores
REF 1662	3 x 2,4 ml seringas de gel branqueador com 10% de peróxido de carbamida

Apresentação 17%

REF 1659	kit do paciente 4 x 2,4 ml seringas de gel branqueador com 17% de peróxido de carbamida, estojo de armazenamento, nécessaire
REF 1664	set com 6 x 2,4 ml seringas de gel branqueador com 17% de hidróxido de carbamida, 1,2 ml seringa Block Out Gel LC, 2 placas de plast. a vácuo, estojo de armazenamento, escala de cores
REF 1665	3 x 2,4 ml seringas de gel branqueador com 17% de peróxido de carbamida





RESTAURAÇÕES DIRECTAS

Materiais VOCO para Restaurações Directas – compósitos, compómeros,Ormocer® e cimentos de ionómero de vidro.

Com produtos concebidos em perfeita harmonia entre si, a VOCO possibilita-lhe satisfazer os mais elevados requisitos de resistência e estética da dentisteria restauradora. A gama de produtos desta linha abrange desde materiais para restaurações, bases cavitárias e adesivos até a protectores de superfície para o acabamento de alto brilho. A VOCO desenvolve materiais restauradores para as mais diversas indicações e requisitos. É por isso que, ao lado de vários materiais de estética aprimorada, também oferecemos um compósito de uso universal para a restauração de dentes posteriores.

Calcimol

Calcimol LC

Calcicur



Pasta de hidróxido de cálcio radiopaco, autopolimerizável

Indicações

Revestimento indirecto da polpa
Forro cavitário, compatível com todos os materiais de restauração

Vantagens

- Protecção pulpar efectiva
- Aplicação fácil
- Tempo de trabalho suficiente
- Presa rápida
- Contém 26% de hidróxido de cálcio
- Radiopaco
- Estimula a formação de dentina secundária

Pasta de hidróxido de cálcio radiopaco, fotopolimerizável

Indicações

Revestimento indirecto da polpa
Forro cavitário, compatível com todos os materiais de restauração
Protecção da polpa quando utilizada a técnica de ataque ácido

Vantagens

- Poupa tempo: material fotopolimerizável, que poder ser aplicado directamente com a nova seringa NDT®
- Protecção pulpar efectiva
- Material monocomponente pronto a usar
- Resistente a ácidos
- Estimula a formação de dentina secundária

Calcimol LC na nova seringa NDT®

- NDT® significa Non-Dripping-Technology (tecnologia antigotejamento)
- Especial para materiais de alta fluidez
- Aplicação exacta e sem gotejamento
- Evita perdas de material

Pasta de hidróxido de cálcio, pronta a aplicar

Indicações

Protecção pulpar directa após exposição da polpa ou após pulpotomias
Protecção pulpar indirecta nos casos de cáries profundas
Obturaçãõ provisória dos canais
Desinfecção dos canais

Vantagens

- Indicado para ser utilizado sob todas as bases cavitárias e materiais de restauração
- Pronto a usar
- Efeito antimicrobiano graças ao elevado valor de pH (acima de 11,5)
- Contém 45% de hidróxido de cálcio
- Radiopaco
- Estimula a formação de dentina secundária
- Protecção pulpar efectiva

Apresentação

REF 1097 base 13 g,
catalisador 11 g

Apresentação

REF 1047 tubo 2 x 5 g
REF 1307 seringas 2 x 2,5 g com
cânulas de aplicação
tipo 41

Apresentação

REF 1093 seringa 2 ml com cânulas
de aplicação tipo 42

Amalgam Liner



Verniz protector com prata para uso sob restaurações de amálgama

Indicações

- Selamento da dentina sob restaurações de amálgama
- Selamento de cimentos antes de aplicar amálgama
- Selamento de restaurações de amálgama imediatamente após a colocação

Vantagens

- Protecção pulpar efectiva
- Isolamento contra agressões químicas e bacterianas
- Reduz o risco de infiltrações e cárie secundária
- Combina-se com o mercúrio residual

Apresentação

REF 1024 set com 4,5 g e solvente
REF 1026 frasco 9 g

Ionobond



Ionómero de vidro para bases cavitárias com efeito adesivo

Indicações

Para bases cavitárias


Vantagens

- Excelente aderência química à dentina e ao esmalte
- Elevado grau de biocompatibilidade
- Libertação contínua de flúor
- Elevada resistência à compressão
- Baixa solubilidade
- Expansão térmica similar à do dente

Apresentação

REF 1083 pó 10 g, líquido 15 ml

Ionoseal

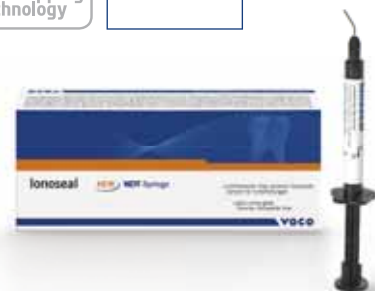

Ionómero de vidro com compósito para bases cavitárias, fotopolimerizável

Indicações

- Bases cavitárias para todos os materiais de restauração
- Selamento de fissuras estendidas
- Restauração de lesões pequenas

Vantagens

- Material monocomponente pronto a usar
- Poupa tempo: fotopolimeriza dentro de segundos
- Aplicação rápida e higiénica
- Elevada resistência à compressão (226 MPa)
- Liberta flúor, protegendo contra a cárie secundária
- Elevado grau de biocompatibilidade
- Radiopaco

Ionoseal na nova seringa NDT®

- NDT® significa Non-Dripping-Technology (tecnologia antigotejamento)
- Especial para materiais de alta fluidez
- Aplicação exacta e sem gotejamento
- Evita perdas de material

Apresentação

REF 1126 tubos 2 x 4 g
REF 1326 seringas 3 x 2,5 g com cânulas de aplicação tipo 41



Material de restauração de alta estética, fotopolimerizável, em seringas e cápsulas

Indicações

Restaurações estéticas anteriores, classes III, IV e V
 Restaurações estéticas posteriores, classes I, II e V
 Reconstrução de dentes anteriores fracturados
 Facetas em compósito, directas e indirectas; revestimento de anteriores com alteração de cor
 Correcções da forma e da cor para melhorar a estética
 Reparações de cerâmica de alta estética, p. ex. facetas
 Ferulização de dentes anteriores

Vantagens

- Dois simples passos e resultados perfeitos
- Camadas idênticas às naturais
- Selecção de cores fácil e precisa
- Transição de cores natural
- Estética natural pode ser obtida com apenas 11 cores em camadas simples
- Fácil de aprender, resultados estéticos rápidos
- Sem cores pré-concebidas, restaurações intuitivas
- Consistência não pegajosa e fácil para modelar
- Alta resistência à luz ambiente e à luz do reflector
- Óptimas propriedades de polimento, resistência à abrasão, estabilidade de brilho
- Fluorescência natural e alta estabilidade de cor
- Bom efeito camaleão para restaurações indetectáveis

Apresentação

REF 1930 set com 8 x 4 g seringas (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 2 x 1,8 g seringas Amaris® Flow (HT, HO), acessórios

REF 1931 set + adesivo com 8 x 4 g seringas (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 2 x 1,8 g seringas Amaris® Flow (HT, HO) + 50 Futurabond NR *SingleDose*, acessórios

REF 1969 escala de cores Amaris®

REF 1950 Caps set com 16 x 0,25 g Caps (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 2 x 1,8 g seringas Amaris® Flow (HT, HO), acessórios

REF 1951 Caps set + adesivo com 16 x 0,25 g Caps (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 2 x 1,8 g seringas Amaris® Flow (HT, HO), + 50 Futurabond NR *SingleDose*, acessórios

Amaris®



Material de restauração de alta estética, fotopolimerizável

Indicações

Ver sets Amaris®

Amaris® Flow



Material de restauração de alta estética, fluido e fotopolimerizável

Vantagens

- O compósito fluido ideal para utilização conjunta com o Amaris®
- Fácil modelagem do bordo incisal
- Bom molhamento
- Cânula fina para a aplicação do material em pequenas quantidades

Apresentação

Seringas de 4 g nas cores

Cores base (opacas)

REF 1933	Amaris® Opaque, O1
REF 1934	Amaris® Opaque, O2
REF 1935	Amaris® Opaque, O3
REF 1936	Amaris® Opaque, O4
REF 1937	Amaris® Opaque, O5
REF 1938	Amaris® Opaque, O Bleach

Cores de esmalte (translúcidas)

REF 1940	Amaris® Translucent light, TL
REF 1941	Amaris® Translucent neutral, TN
REF 1942	Amaris® Translucent dark, TD

Caps 16 × 0,25 g nas cores

Cores base (opacas)

REF 1953	Amaris® Opaque, O1
REF 1954	Amaris® Opaque, O2
REF 1955	Amaris® Opaque, O3
REF 1956	Amaris® Opaque, O4
REF 1957	Amaris® Opaque, O5
REF 1958	Amaris® Opaque, O Bleach

Cores de esmalte (translúcidas)

REF 1960	Amaris® Translucent light, TL
REF 1961	Amaris® Translucent neutral, TN
REF 1962	Amaris® Translucent dark, TD

Apresentação

Seringas 2 × 1,8 g nas cores

Cores individuais

REF 1945	Amaris® Flow High translucent, HT
REF 1946	Amaris® Flow High opaque, HO

Amaris® Gingiva



Material de restauração de alta estética, fotopolimerizável, em cores de gengiva

Indicações

Restaurações de classe V (cáries cervicais, erosões radiculares, defeitos cuneiformes), especialmente nos casos de retração do periodonto causada por doenças periodontais

Recobrimento de colos dentários hipersensíveis e escurecidos, especialmente em áreas visíveis, como a região anterior

Correcções estéticas aprimoradas nos casos de dentes mal posicionados, para aplicação em facetas directas e correcções estéticas da transição “branco-vermelho”

Vantagens

- Quase todas as cores de gengiva podem ser reproduzidas com uma cor base combinada com 3 opacos misturáveis
- Solução estética e funcional para colos largamente expostos por recessão gengival, bem como para defeitos cuneiformes em áreas cervicais
- A mais moderna técnica de restauração a compósito: Amaris® know-how nas cores de gengiva

Caso clínico 1



1 Situação clínica inicial do dente 13



2 Reconstrução com Amaris Gingiva 4 dias após o tratamento restaurador

Fonte:
PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinik
für Konservierende Zahnheilkunde des
Universitätsklinikums Jena / Alemanha

Caso clínico 2



1 Situação clínica inicial dos dentes 12 e 13 após a conclusão do tratamento periodontal



2 Reconstrução papilar na região dos dentes 12 e 13 com Amaris Gingiva. A conformação da área ferulizada permite higienizar a base sem dificuldades.

Fonte:
PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Poliklinik
für Konservierende Zahnheilkunde des
Universitätsklinikums Jena / Alemanha

Apresentação

- REF 1970 set com 1 x 4 g seringa cor base nature, 3 x 1,2 g seringas opacificadores (white, light, dark), acessórios
- REF 1971 seringa 1 x 4 g, cor base nature

x-tra fil



Material de restauração fotopolimerizável para dentes posteriores

Indicações

Restaurações de classes I e II
Reconstrução de cotos

Vantagens

- Fotopolimerizável em camadas de 4 mm
- Apenas 10 s de tempo de fotopolimerização
- Cor universal
- Duradouro e económico
- Tempo de trabalho reduzido, especialmente em combinação com Futurabond NR *SingleDose*
- Fácil manuseamento
- Excelentes propriedades físicas

Caso clínico



No dente 26, a restauração de amálgama em mau estado deve ser substituída



O brilho da superfície mostra que o adesivo foi aplicado satisfatoriamente antes da polimerização



Modelagem das cristas marginais contra a matriz



Preenchimento da cavidade em incrementos de 4 mm



Restauração da cavidade palatina



Restauração com x-tra fil após o acabamento

Fonte: Dr. Jürgen Manhart / Private Instructor / Alemanha

Apresentação

REF 1739 seringas 10 × 5 g, cor universal
REF 1740 seringa 5 g, cor universal

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g, cor universal



Material de restauração universal nano-híbrido

Indicações

Restaurações de classes I a V
 Reconstrução de dentes anteriores fracturados
 Facetas em dentes anteriores com alterações de cor
 Correções de forma e cor para melhorar a estética
 Fixação em bloco ou ferulização de dentes com mobilidade
 Reparação de facetas
 Restauração de dentes decíduos
 Reconstrução de cotos
 Inlays de compósito

Vantagens

- Material semelhante aos tecidos dentários para restaurações mais estáveis
- Atende aos mais elevados requisitos restauradores na região anterior e posterior – aplicação universal
- Alta estabilidade à luz
- Opacidade e translucência harmónicas, para resultados naturais utilizando uma só cor
- Sistema de cores inteligente, com as novas cores ^{vc}A3.25 e ^{vc}A5 para cada situação clínica
- Consistência plástica e não pegajosa, favorável à modelagem
- Fácil polimento de alto brilho – superfícies permanentemente lisas
- Compatível com todos os adesivos convencionais

Apresentação

REF 2600 set com 5 x 4 g seringas (A2, A3, ^{vc}A3.25, A3.5, ^{vc}A5), escala de cores
 REF 2601 set + adesivo com 5 x 4 g seringas (A2, A3, ^{vc}A3.25, A3.5, ^{vc}A5), escala de cores + 50 Futurabond NR *SingleDose*, acessórios

Seringas de 4 g nas cores

REF 2610	A1	REF 2620	B2
REF 2611	A2	REF 2621	B3
REF 2612	A3	REF 2624	C2
REF 2613	^{vc} A3.25	REF 2627	D3
REF 2614	A3.5	REF 2630	OA1
REF 2615	A4	REF 2631	OA2
REF 2616	^{vc} A5	REF 2633	OA3.5
REF 2619	B1	REF 2635	BL
REF 2607	escala de cores Grandio®SO		

REF 2640 set com 80 x 0,25 g Caps (16 x cada cor: A2, A3, ^{vc}A3.25, A3.5, ^{vc}A5), escala de cores
 REF 2641 set + adesivo com 80 x 0,25 g Caps (16 x cada cor A2, A3, ^{vc}A3.25, A3.5, ^{vc}A5), escala de cores + 50 Futurabond NR *SingleDose*, acessórios

Caps 16 x 0,25 g nas cores

REF 2650	A1	REF 2660	B2
REF 2651	A2	REF 2661	B3
REF 2652	A3	REF 2664	C2
REF 2653	^{vc} A3.25	REF 2667	D3
REF 2654	A3.5	REF 2670	OA1
REF 2655	A4	REF 2671	OA2
REF 2656	^{vc} A5	REF 2673	OA3.5
REF 2659	B1	REF 2675	BL

Grandio®SO Flow



Material de restauração nano-híbrido, fluido e universal – viscosidade média

Indicações

Restaurações de classes I a V
 Tratamentos restauradores minimamente invasivos
 Selagem de fissuras estendidas
 Preenchimento de áreas retentivas
 Base ou forramento de cavidades
 Reparação de restaurações e facetas
 Cimentação de peças protéticas translúcidas (p. ex. coroas de cerâmica pura)
 Fixação em bloco e ferulização de dentes (p. ex. com tiras de fibra de vidro)
 Como material de base para tiras de fibra de vidro ou similares na confecção de coroas e pontes semipermanentes

Vantagens

- Compósito fluido de viscosidade média, ou seja, de excelente fluidez, capaz de cobrir por completo as paredes cavitárias
- Uso universal – indicado para cavidades de qualquer classe
- Propriedades físicas, p. ex. dureza, resistência mecânica e resistência à abrasão, superiores às de diversos materiais condensáveis
- Altíssimo conteúdo de carga, superior a 81% w/w
- Aplicação segura e precisa
- 12 cores para restaurações estéticas – perfeitamente adaptadas ao Grandio®SO
- Alta estabilidade de cor
- Ótimas propriedades de polimento e brilho duradouro
- Cor branco-opaco (WO) com radiopacidade extremamente alta (500 % Al) para um forte contraste com o tecido dentário ou com outros materiais de restauração
- Disponível na seringa antigotejamento NDT® ou em Flow-Caps com cânula de metal flexível

Apresentação

REF 2720 set com 5 x 2 g seringas (A1, A2, A3, A3.5, WO), escala de cores, acessórios

Seringas 2 x 2 g nas cores

REF 2722	A1	REF 2729	B1
REF 2723	A2	REF 2730	B2
REF 2724	A3	REF 2732	C2
REF 2725	A3.5	REF 2734	OA2
REF 2726	A4	REF 2736	BL
REF 2727	^{vc} A5	REF 2737	WO
REF 2607	escala de cores Grandio®SO		

Caps 16 x 0,25 g nas cores

REF 2742	A1
REF 2743	A2
REF 2744	A3
REF 2745	A3.5
REF 2746	A4
REF 2749	B1

Grandio®SO Heavy Flow



Material de restauração nano-híbrido fluido, universal – alta viscosidade

Indicações

Restaurações de classes I a V
Tratamentos restauradores minimamente invasivos
Selagem de fissuras estendidas
Bloqueio de áreas retentivas
Base ou forramento de cavidades
Reparação de restaurações e facetas
Cimentação de peças protéticas translúcidas (p. ex. coroas de cerâmica pura)
Fixação em bloco e ferulização de dentes (p. ex. com tiras de fibra de vidro)
Como material de base para tiras de fibra de vidro ou similares na confecção de coroas e pontes semipermanentes

Vantagens

- Viscosidade maior que a dos compósitos fluidos convencionais, ou seja, não escorre
- Uso universal – indicado para cavidades de qualquer classe
- Propriedades físicas, p. ex. dureza, resistência mecânica e resistência à abrasão, superiores às de diversos materiais condensáveis
- Altíssimo conteúdo de carga, superior a 83% w/w
- Aplicação exacta, cobrindo por completo as paredes da cavidade
- Aplicação em quantidades precisas e sem excessos para maior rapidez no trabalho
- Fácil preenchimento de áreas retentivas, caixas proximais e áreas junto da gengiva
- Excelente para utilização com GrandTEC®
- 12 cores para restaurações estéticas – perfeitamente adaptadas ao Grandio®SO
- Alta estabilidade de cor
- Óptimas propriedades de polimento e brilho duradouro
- Disponível na seringa antigotejamento NDT® ou em Flow-Caps com cânula de metal flexível

Apresentação

REF 2680 set com 5 x 2 g seringas (A2, A3, A3.5, ^{vc}A5, WO), escala de cores, acessórios

Seringas 2 x 2 g nas cores

REF 2684	A1	REF 2690	B1
REF 2685	A2	REF 2691	B2
REF 2686	A3	REF 2692	C2
REF 2687	A3.5	REF 2693	OA2
REF 2688	A4	REF 2695	BL
REF 2689	^{vc} A5	REF 2696	WO
REF 2607	escala de cores Grandio®SO		

Caps 16 x 0,25 g nas cores

REF 2704	A1
REF 2705	A2
REF 2706	A3
REF 2707	A3.5
REF 2708	A4
REF 2712	B1

GrandTEC®



Tiras de fibra de vidro impregnadas com resina, fotopolimerizáveis, para utilização em técnicas adesivas odontológicas

Indicações

Estabilização dentária

- após tratamentos ortodônticos
- após tratamentos periodontais

Como auxiliar no tratamento de traumas dentários

- para a fixação e ferulização de dentes avulsionados ou abalados
- fixação de fragmentos após fracturas

Para o reforço ou a confecção de pontes provisórias de resina composta

No tratamento provisório após extrações, mediante substituição do dente ausente com um dente de acrílico

Para o tratamento provisório ou semipermanente de um espaço na arcada, utilizando um dente natural extraído


Para o tratamento provisório após a instalação de um implante, durante o período de osteointegração

Vantagens

- Produto suplementar que alarga consideravelmente o leque de aplicações dos compósitos, por exemplo, na traumatologia, periodontia, ortodontia, dentisteria e prótese

Caso clínico

Dr. Denner – Restauração de um espaço na arcada, após a exodontia, utilizando GrandTEC® e um dente extraído.

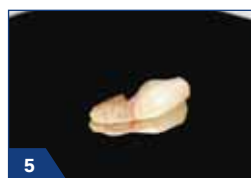

Tira GrandTEC® com película de protecção afastada.

Apresentação

REF 1168 5 tiras de fibra de vidro de 55 mm

REF 1169 Kit de teste com 5 tiras de fibra de vidro de 55 mm, modelo, auxiliares para aplicação, 2 x 2 g seringas Grandio®SO Heavy Flow A3, acessórios



Material de restauração nano-híbrido universal

Indicações

Restaurações de classes I a V
Reconstrução de dentes anteriores fracturados
Facetas em dentes anteriores com alterações de cor
Correcções da forma e da cor para melhorar a estética
União, ferulização de dentes anteriores com mobilidade
Reparação de facetas
Reconstrução de cotos
Inlays de compósito

Vantagens

- Excelentes propriedades físicas para restaurações duradouras
- Contração mais reduzida que a dos compósitos convencionais
- O maior conteúdo de carga da sua classe (87% w/w)
- Excelente resistência à abrasão
- Alta resistência à flexão
- Consistência plástica para um fácil manuseamento
- Excelente estética
- Pode ser usado com todos os adesivos convencionais
- Disponível em 16 cores
- Escala de cores fidedigna

Apresentação

REF 1800 set com 5 x 4 g seringas (A1, A2, A3, A3.5, B2), escala de cores
REF 1801 set + adesivo com 5 x 4 g seringas (A1, A2, A3, A3.5, B2), escala de cores + 50 Futurabond NR *SingleDose*, acessórios
REF 1899 escala de cores Grandio®

Seringas de 4 g nas cores

REF 1810	A1	REF 1817	C2
REF 1811	A2	REF 1818	C3
REF 1812	A3	REF 1825	D2
REF 1813	A3.5	REF 1819	D3
REF 1814	A4	REF 1820	I
REF 1824	B1	REF 1821	OA2
REF 1815	B2	REF 1822	OA3.5
REF 1816	B3	REF 1823	BL



Indicações

Ver Grandio®

Vantagens

- Ver Grandio®

Caso clínico



Situação inicial



Preparo com base cavitária Grandio® Flow



Restauração com Grandio® concluída

Fonte: Dr. Marcelo Balsamo

Apresentação

REF 1830	set com 50 × 0,25 g Caps (10 × A1, A2, A3, A3.5, B2), escala de cores
REF 1831	set + adesivo com 50 × 0,25 g Caps (10 × A1, A2, A3, A3.5, B2), escala de cores + 50 Futurabond NR <i>SingleDose</i> , acessórios
REF 1899	escala de cores Grandio®

Caps 20 × 0,25 g, nas cores

REF 1840	A1	REF 1847	C2
REF 1841	A2	REF 1848	C3
REF 1842	A3	REF 1855	D2
REF 1843	A3.5	REF 1849	D3
REF 1844	A4	REF 1850	I
REF 1854	B1	REF 1851	OA2
REF 1845	B2	REF 1852	OA3.5
REF 1846	B3	REF 1853	BL

Grandio® Flow



Material de restauração nano-híbrido fluido, universal

Indicações

- Restauração de pequenas cavidades de classe I
- Selamento de fissuras estendidas
- Para bloquear retenções
- Como base ou forro de cavidades (p. ex.: técnica de CBF)
- Restaurações de classes II a V
- Reparação de restaurações e facetas
- Cimentação de peças protésicas translúcidas (p. ex.: coroas de cerâmica pura, facetas)

Grandio® Flow na nova seringa NDT®

- NDT® significa Non-Dripping-Technology (tecnologia antigotejamento)
- Especial para materiais de alta fluidez
- Aplicação exacta e sem gotejamento
- Evita perdas de material

Vantagens

- Óptima fluidez
- Conteúdo de carga: 80,2% w/w
- Correspondência exacta com as cores de Grandio®
- Excelentes propriedades de molhamento
- Excelentes propriedades físicas
- Contração de polimerização significativamente menor do que a dos materiais "flow" convencionais
- Excelente resistência à abrasão
- Alta resistência à flexão
- Pode ser usado com todos os adesivos convencionais
- As cores especiais BL (branqueado light) e WO (branco opaco) permitem responder a necessidades especiais: branqueado light é adequado para dentes branqueados e uso em dentisteria pediátrica; a cor branco opaco constitui uma base de restauração ideal para, p. ex., zonas de dentina escurecida e núcleos

Apresentação

REF 1860	set com 8 x 2 g seringas (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, OA2), escala de cores
REF 1861	set + adesivo com 8 x 2 g seringas (A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, OA2) + 50 Futurabond NR <i>SingleDose</i> , acessórios

Seringas 2 x 2 g nas cores

REF 1863	A1	REF 1867	B2
REF 1864	A2	REF 1873	C2
REF 1865	A3	REF 1874	D2
REF 1866	A3.5	REF 1870	OA2
REF 1868	A4	REF 1871	BL
REF 1869	B1	REF 1872	WO (branco-opaco)

REF 1877	set com 40 x 0,25 g Caps (8 x A1, A2, A3, A3.5, OA2), escala de cores
REF 1878	set + adesivo com 40 x 0,25 g Caps (8 x A1, A2, A3, A3.5, OA2), escala de cores + 50 Futurabond NR <i>SingleDose</i> , acessórios

Caps 20 x 0,25 g nas cores

REF 1880	A1	REF 1886	B2
REF 1881	A2	REF 1887	C2
REF 1882	A3	REF 1888	D2
REF 1883	A3.5	REF 1889	OA2
REF 1884	A4	REF 1890	BL
REF 1885	B1	REF 1891	WO (branco-opaco)

Curvy



Cunhas interdentárias anatómicas para utilização com matrizes no tratamento restaurador

Indicações

Meio auxiliar para tratamentos restauradores com matrizes de qualquer tipo

Separação dos dentes para obtenção de contactos proximais adequados

Vantagens

- Forma especial que permite fixar a matriz, separar dentes vizinhos e vedar a região cervical
- A curvatura da cunha acompanha a anatomia dentária
- Adequadas para matrizes seccionais e circunferenciais
- Quatro tamanhos: pequena, média, grande, extra grande
- Utilização extremamente fácil, graças à ponta fina e à conformação tridimensional
- Base curva, para reduzir a pressão sobre a papila gengival
- Confeccionada em plástico: não expande, não desfia e não mancha



Codificação por cores, conforme o tamanho e a curvatura das cunhas

Apresentação

REF 2060	Curvy set com 6 × 52 unidades
REF 2061	Curvy 6 × 52 unidades small
REF 2062	Curvy 6 × 52 unidades medium
REF 2063	Curvy 6 × 52 unidades large
REF 2064	Curvy 6 × 52 unidades extra large

Arabesk Top



Compósito restaurador micro-híbrido fotopolimerizável

Indicações

Restaurações de classes I a V
Reconstrução de dentes anteriores fracturados
Facetas em dentes anteriores com alterações de cor
Correcções da forma e da cor para melhorar a estética
União, ferulização de dentes anteriores com mobilidade
Recomendado particularmente para inlays de compósito

Vantagens

- Manuseamento fácil
- Grande facilidade de compactar e esculpir
- Excelentes propriedades de polimento
- Estética excelente
- Efeito camaleão para adaptação individual da cor
- Restaurações duradouras
- Baixa contracção de polimerização
- Universal – para todas as classes de cavidades

Apresentação

REF 1530 set com 7 x 4 g seringas (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, OA2), 5 ml Vococid Gel, 4 ml Solobond M, acessórios

Seringas de 4 g nas cores

REF 1532–1535 A1, A2, A3, A3.5
REF 1537–1539 B2, B3, C2
REF 1541 OA2

Caps 25 x 0,25 g nas cores

REF 1556 A1
REF 1547–1549 A2, A3, A3.5
REF 2108 escala de cores Arabesk Top

Arabesk Flow



Compósito restaurador micro-híbrido fluido com partículas de vitrocerâmica, fotopolimerizável

Indicações

Restauração de pequenas cavidades
Selamento de fissuras estendidas
Restaurações de classes III e V
Base ou forramento de cavidades
Reparação de restaurações e facetas
Cimentação de peças protéticas translúcidas de cerâmica pura

Vantagens

- Fluido, com excelentes propriedades de molhamento
- Excelente estética (efeito camaleão)
- Propriedades tixotrópicas
- Muito boa adesão com Solobond M
- Aplicação exacta
- Económico

Apresentação

Seringas de aplicação directa de 3 g nas cores

REF 1563 A2
REF 1564 A3
REF 1565 A3.5

Caps 25 x 0,25 g nas cores

REF 1560 A2
REF 1561 A3
REF 1562 A3.5

Arabesk



Compósito micro-híbrido fotopolimerizável com sistema de cargas múltiplas de Sintraglass

Indicações

Ver Arabesk Top

Vantagens

- Alta resistência à abrasão e estabilidade
- Fácil de condensar e adaptar
- Excelente estética e adaptação à cor do dente
- Excelentes propriedades de polimento
- Universal – para todas as classes de cavidades

Apresentação

REF 1338 set com 7 × 4 g seringas (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I), 5 ml Vococid Gel, 4 ml Solobond M, acessórios

Seringas de 4 g nas cores

REF 1339 A1
REF 1340 A2
REF 1341 A3
REF 1342 A3.5
REF 1343 B2
REF 1344 B3
REF 1346 I
REF 2105 escala de cores Arabesk

Polofil Supra



Compósito restaurador micro-híbrido fotopolimerizável

Indicações

Restaurações de classes I a V
Reconstrução de dentes anteriores fracturados
Facetas em dentes anteriores com alterações de cor
União, ferulização de dentes anteriores com mobilidade

Vantagens

- Combina as vantagens de compósitos com cargas de micro e macro-partículas
- Não pegajoso, facilmente compactável
- Resistência à abrasão e cores estáveis
- Baixa contracção de polimerização
- Restaurações resistentes e duradouras
- Baixa absorção de água

Apresentação

REF 1360 set com 7 × 4 g seringas (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I), 5 ml Vococid Gel, 4 ml Solobond M, acess.

REF 1373 Triset com 3 × seringas 4 g (A2, A3, A3.5), 3 ml Vococid, 4 ml Solobond M, acessórios

Seringas de 4 g nas cores

REF 1361 A1 REF 1365 B2
REF 1362 A2 REF 1366 B3
REF 1363 A3 REF 1368 I
REF 1364 A3.5
REF 2107 escala de cores Polofil Supra

Alfacomp



Material de restauração à base de resina quimicamente activada, radiopaco

Indicações

Restaurações de classes III, IV e V
Pequenas restaurações de classes I e II não sujeitas a forças oclusais
Reconstrução de cotos
Reconstrução de dentes fracturados
Dentisteria estética (p. ex. diastema, hipoplasia do esmalte, microdontias, erosão)

Vantagens

- Alta resistência à abrasão e estabilidade
- Fácil de misturar, consistência homogênea
- Restaurações estéticas e duradouras

Apresentação

REF 1042 set com 15 g base, 15 g catalisador

Admira



Material de restauração fotopolimerizável à base deOrmocer®

Indicações

Restaurações de classes I a V
 Reconstrução de dentes anteriores fracturados
 Facetas em dentes anteriores com alterações de cor
 Correções da forma e da cor para melhorar a estética
 União, ferulização de dentes anteriores com mobilidade
 Reparação de facetas
 Reconstrução de cotos
 Inlays indirectas

Vantagens

- Excelente biocompatibilidade
- Excelente estética
- Comprovado por vários anos
- Consistência não pegajosa, fácil de esculpir, boa adaptação marginal
- Contração mais reduzida que a de compósitos convencionais
- Expansão térmica similar à do dente
- Excelente adesão à dentina e esmalte com Admira Bond
- Resistente à abrasão, cores estáveis
- Ideal para todas as classes de cavidade

Apresentação

REF 2420 set com 7 x 4 g seringas (A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, OA2), 5 ml Vococid Gel, 4 ml Admira Bond, escala de cores, acessórios
 REF 2419 set II com 7 x 4 g seringas (3 x A2, 3 x A3, 1 x A3.5), 5 ml Vococid Gel, 4 ml Admira Bond, acessórios
 REF 2431 Triset com 3 x 4 g seringas (A2, A3, A3.5), 5 ml Vococid Gel, 4 ml Admira Bond, acessórios

Seringas de 4 g nas cores

REF 2421 A1	REF 2427 B3
REF 2422 A2	REF 2428 C2
REF 2423 A3	REF 2430 OA2
REF 2424 A3.5	REF 2437 BL
REF 2425 A4	REF 2429 I
REF 2426 B2	
REF 2439 escala de cores Admira	

Caps 25 x 0,25 g nas cores

REF 2451 A1	REF 2458 A4
REF 2452 A2	REF 2455 B2
REF 2453 A3	REF 2456 B3
REF 2454 A3.5	REF 2457 C2

Admira Flow



Admira Bond



Material de restauração fluido fotopolimerizável à base de Ormocer®

Indicações

Restaurações com técnicas minimamente invasivas
 Restauração de pequenas cavidades
 Selamento de fissuras estendidas
 Para bloquear retenções
 Como base ou forro de cavidades (p. ex.: técnica de CBF)
 Restaurações de classes III a V
 Reparação de restaurações e facetas
 Cimentação de peças protéticas translúcidas (coroas de porcelana pura, facetas)

Vantagens

- Biocompatibilidade e baixa contração
- Óptima fluidez (tixotrópico): fluido durante a aplicação mas consistente em repouso
- Alto grau de elasticidade: absorve forças mecânicas
- Correspondência exacta ao Admira em termos de translucidez e cores
- Excelentes propriedades de molhamento
- Disponível em cápsulas ou seringas com cânulas finas e longas
- Aplicação rápida

Adesivo monocomponente para dentina / esmalte à base de Ormocer®

Indicações

Restaurações directas de todas as classes, com quaisquer tipos de materiais de restauração fotopolimerizáveis (Ormocer®, compósitos, compómeros)

Vantagens

- À base de Ormocer®
- Elevada adesão e integridade marginal duradoura
- Um componente – uma camada
- Universal – para todos os materiais de restauração

Apresentação

REF 2481 Triset com 3 x 1,8 g seringas (A2, A3, A3.5), 5 ml Vococid Gel, 4 ml Admira Bond, acessórios

Seringas 2 x 1,8 g nas cores

REF 2486 A1
 REF 2482 A2
 REF 2483 A3
 REF 2484 A3.5

Caps 25 x 0,25 g nas cores

REF 2491 A1
 REF 2492 A2
 REF 2493 A3
 REF 2494 A3.5

Apresentação

REF 2432 frascos 2 x 4 ml
 REF 2479 frasco 4 ml

Twinky Star



Material de restauração à base de compómero colorido fotopolimerizável, com efeito brilhante

Indicações

Restauração de dentes decíduos

Vantagens

- Oito atraentes cores cintilantes
- Aplicação fácil e rápida através de cápsulas
- Excelentes propriedades de polimento
- Baseado na comprovada tecnologia de compómeros da VOCO
- Escala de cores fidedigna
- Ajuda os pais a motivarem os seus filhos às visitas ao dentista
- Ajuda as crianças a superarem medos
- Material de marketing para grupo-alvo disponível



Arcada decídua com restaurações em cores Twinky Star

Apresentação

- REF 1679 set com 40 x 0,25 g Caps + 50 Futurabond M *SingleDose*, escala de cores
- REF 1680 set com 40 x 0,25 g Caps em cores diferentes, escala de cores

Caps 25 x 0,25 g nas cores

- | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|-------------|
| REF 1681 | Ouro | REF 1682 | Prata |
| REF 1683 | Azul | REF 1684 | Cor-de-rosa |
| REF 1685 | Verde | REF 1686 | Laranja |
| REF 1687 | Verde-Limão | REF 1688 | Berry |
| REF 1689 | escala de cores Twinky Star | | |

Glasiosite



Compómero fotopolimerizável para restaurações

Indicações

Restauração de dentes decíduos

Restaurações de cavidades de classes III e V

Facetas em dentes anteriores com alterações de cor

Restaurações provisórias de classes I e II

Selamento de fissuras estendidas

Vantagens

- Alta resistência à abrasão, à compressão e à flexão
- Muito boa adesão à dentina / esmalte com o adesivo auto-condicionante Futurabond NR
- Fácil de esculpir, polimento de alto brilho
- Conjunto inclui Futurabond NR: adesivo dentina / esmalte autocondicionante rápido e económico
- Alta estabilidade de cor e translucidez para uma estética duradoura
- Libertação contínua de flúor

Apresentação

- REF 1600 set com 40 x 0,25 g Caps (10 x A3, 10 x A4, 5 x A2, 5 x A3.5, 5 x B3, 5 x C2), 2 x 4 ml Futurabond NR, escala de cores, acessórios

Caps 25 x 0,25 g nas cores

- | | | | |
|----------|------|----------|----|
| REF 1601 | A2 | REF 1604 | A4 |
| REF 1602 | A3 | REF 1605 | B3 |
| REF 1603 | A3.5 | REF 1606 | C2 |

Ionolux



Ionómero de vidro fotopolimerizável para restaurações

Indicações

Restaurações de classes III e V, em especial cáries cervicais e radiculares

Restauração de dentes decíduos

Pequenas restaurações de classe I

Restaurações provisórias

Reconstrução de cotos

Bases cavitárias

Vantagens

- Aplicação fácil, modela-se de imediato
- Não adere aos instrumentos
- Dispensa o condicionamento da superfície dentária
- Não necessita de verniz
- Ideal para a técnica de “sanduíche”
- Não escorre da cavidade
- Aplicação simples, directa e sem bolhas
- Evita erros na mistura

Caso clínico



antes



depois

Fonte: Dr. Isma Goltz / Alemanha

Apresentação

REF 1990	12 g pó A1, 5 ml líquido, bloco de mistura, acessórios
REF 1991	12 g pó A2, 5 ml líquido, bloco de mistura, acessórios
REF 1992	12 g pó A3, 5 ml líquido, bloco de mistura, acessórios

Apresentação

REF 1980	set com 50 cápsulas (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3), acessórios
REF 1981	Intro Set com 20 cápsulas A3, AC Applicator, AC Activator
REF 1984	20 cápsulas A1
REF 1985	20 cápsulas A2
REF 1986	20 cápsulas A3

VOCO Ionofil Molar



Ionómero de vidro para restaurações

Indicações

Restaurações de classe I (não sujeitas a forças oclusais)
Restaurações provisórias de longo prazo em cavidades de classes I e II
Bases cavitárias e reconstruções
Reconstrução de cotos
Restauração de dentes decíduos
Restauração de defeitos cuneiformes e erosões do esmalte cervical

Vantagens

- Óptima condensabilidade
- Consistência não pegajosa
- Altíssima resistência à abrasão, à compressão e à flexão
- Boa adesão à dentina / esmalte
- Restaurações muito duradouras
- Libertação elevada e contínua de flúor
- Radiopaco
- Biocompatível
- Translucidez estética, semelhante à do dente

Apresentação

REF 1441	set com 3 x 15 g pó (A1, A2, A3), 10 ml líquido, 3 ml Final Varnish LC
REF 1447	pó 15 g A1
REF 1442	pó 15 g A2
REF 1443	pó 15 g A3
REF 1448	líquido 10 ml

VOCO Ionofil Molar AC



Ionómero de vidro para restaurações

Indicações

Restaurações de classe I (não sujeitas a forças oclusais)
Restaurações provisórias de longo prazo em cavidades de classes I e II
Bases cavitárias e reconstruções
Reconstrução de cotos
Restauração de dentes decíduos
Restauração de defeitos cuneiformes e erosões do esmalte cervical

Vantagens

- 40% mais cimento disponível que nas cápsulas para restaurações estéticas
- Três cores (A1, A2, A3)
- Outras vantagens: ver VOCO Ionofil Molar

Apresentação

REF 1463	set com 48 cápsulas (8 x A1, 8 x A2, 32 x A3), 3 ml Final Varnish LC
REF 1464	48 cápsulas A1
REF 1460	48 cápsulas A2
REF 1465	48 cápsulas A3

VOCO Ionofil Molar AC Quick



Ionómero de vidro para restaurações

Indicações

Ver VOCO Ionofil Molar AC

Vantagens

- Ótima condensabilidade
- Consistência não pegajosa
- Altíssima resistência à abrasão, à compressão e à flexão
- 40% mais cimento disponível que nas cápsulas para restaurações estéticas
- Boa adesão à dentina / esmalte
- Restaurações muito estáveis, com boa integridade marginal
- Liberação elevada e contínua de flúor
- Radiopaco
- Biocompatível
- Translucidez estética, semelhante à do dente
- Três cores (A1, A2, A3)
- O tempo de presa de apenas 2,5 minutos faz com que VOCO Ionofil Molar AC Quick seja um material perfeito para o tratamento de crianças e pacientes inquietos

Apresentação

REF 1630	set com 48 cápsulas (8 × A1, 8 × A2, 32 × A3), 3 ml Final Varnish LC
REF 1469	set com 20 cápsulas A3, AC Activator, AC Applicator
REF 1631	48 cápsulas A1
REF 1634	48 cápsulas A2
REF 1632	48 cápsulas A3

Easy Glaze



Verniz nanoparticulado fotopolimerizável para selamento de superfícies

Indicações

Selamento de superfícies de cimento de ionómero de vidro (CIV), coroas e pontes provisórias e restaurações definitivas a compósito

Protecção das superfícies de CIV contra os efeitos da humidade e da desidratação imediatamente após a colocação

Selamento de bases / núcleos em CIV antes da tomada de impressões

Selamento e protecção das interfaces adesivas entre a restauração e a estrutura dentária

Vantagens

- Superfícies estéticas e de alto brilho
- Fácil de usar
- Protege contra pigmentações

Em combinação com VOCO Ionofil Molar AC / Quick

- Protecção contra a humidade e a desidratação imediatamente após a colocação da restauração
- Fluorescência igual à do dente
- Brilho natural

Apresentação

REF 1016	frasco 5 ml, acessórios
----------	-------------------------

Ionofil Plus AC



Ionómero de vidro para restaurações

Indicações

Restauração de defeitos cuneiformes e erosões do esmalte cervical
Bases cavitárias
Restauração de dentes decíduos
Tratamento de lesões de cárie
Restaurações de classe III
Selagem de fissuras estendidas

Vantagens

- Consistência fácil de espalhar
- Aplicação simples, directa e sem bolhas
- Boa adaptação marginal
- Óptima fluidez
- Libertação contínua de flúor

Apresentação

REF 1700	set com 48 cápsulas (8 × A1, 32 × A3, 8 × B3), 3 ml Final Varnish LC
REF 1701	48 cápsulas A1
REF 1702	48 cápsulas A3
REF 1703	48 cápsulas B3

Ionofil Plus



Ionómero de vidro para restaurações

Indicações

Restauração de defeitos cuneiformes e erosões do esmalte cervical
Bases cavitárias
Restauração de dentes decíduos
Tratamento de lesões de cárie
Restaurações de classe III

Vantagens

- Consistência fácil de espalhar
- Boa adaptação marginal
- Tecnologia de ionómero de vidro melhorada
- Boa estética em três cores

Apresentação

REF 1520	set com 3 × 15 g pó (A1, A2, A3), 10 ml líquido, 3 ml Final Varnish LC, acessórios
REF 1521	pó 15 g A1
REF 1525	pó 15 g A2
REF 1522	pó 15 g A3
REF 1524	líquido 10 ml

Aqua Ionofil Plus



Ionómero de vidro para restaurações misturável com água

Indicações

Restauração de defeitos cuneiformes e erosões do esmalte cervical
Bases cavitárias
Restauração de dentes decíduos
Tratamento de lesões de cárie
Restaurações de classe III
Selagem de fissuras estendidas

Vantagens

- Tecnologia de ionómero de vidro melhorada
- Boa estética em três cores
- Mistura-se simplesmente com água
- Nenhum risco de sobreacidificação
- Consistência fácil de espalhar
- Boa adaptação marginal

Apresentação

REF 1509	set com 3 × 15 g pó (A1, A2, A3), 3 ml Final Varnish LC, acessórios
REF 1510	pó 15 g A1
REF 1513	pó 15 g A2
REF 1511	pó 15 g A3
REF 2110	escala de cores Aqua Ionofil Plus

Argion Molar AC



Ionómero de vidro para restaurações reforçado com prata

Indicações

Reconstrução de cotos
Restaurações provisórias de longo prazo em cavidades de classes I e II
Bases cavitárias e reconstruções
Restauração de dentes decíduos

Vantagens

- Óptima condensabilidade
- Consistência não pegajosa
- Altamente radiopaco devido à dispersão fina de partículas de prata
- Altíssima resistência à abrasão, à compressão e à flexão
- Boa adesão à dentina / esmalte
- Libertação elevada e contínua de flúor

Apresentação

REF 1476 48 cápsulas,
3 ml Final Varnish LC

Argion



Ionómero de vidro para restaurações reforçado com prata e misturável com água

Indicações

Reconstrução de cotos
Restauração de dentes decíduos
Bases cavitárias e reconstruções

Vantagens

- Alta radiopacidade
- Libertação contínua de flúor
- Alta resistência à compressão, estabilidade
- Mistura-se simplesmente com água
- Todos os ingredientes pré-doseados na versão pó – nenhum risco de sobreadificação

Apresentação

REF 1176 pó 15 g e frasco
conta-gotas

Final Varnish LC



Verniz para o selamento de restaurações de ionómero de vidro, fotopolimerizável

Indicações

Selamento de superfícies de cimento de ionómero de vidro
Protecção de superfícies de cimento contra a humidade e a desidratação

Vantagens

- Protecção permanente, selamento seguro

Apresentação

REF 1241 frascos 2 x 3 ml

Futurabond NR



Adesivo autocondicionante, fotopolimerizável e reforçado com nanopartículas

Indicações



Restaurações directas de todas as classes, com quaisquer tipos de materiais de restauração fotopolimerizáveis
Tratamento da hipersensibilidade dentinária

Vantagens

- Propriedades de adesão iguais às dos preparados de condicionamento total
- Integridade marginal duradoura
- Tolerante à humidade
- Aplicação fácil e rápida
– uma camada, uma fotopolimerização
- Universal, para todos os materiais de restauração fotopolimerizáveis
- Ideal para uso pediátrico
- Libertação de flúor
- Não necessita conservação em frigorífico

Aprecie a facilidade!

Simple pressão! Simple aplicação!

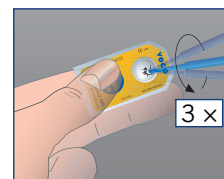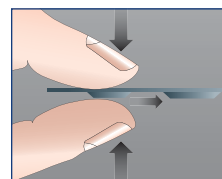

Futurabond NR nas práticas SingleDose

- Fácil, rápido e higiénico
- Não necessita de suportes adicionais
- Não entorna, não escorre



Apresentação

REF 1148 frasco 4 ml líquido A,
frasco 4 ml líquido B, acessórios

REF 1152 50 SingleDose, acessórios
REF 1153 200 SingleDose, acessórios

Futurabond DC



Adesivo autocondicionante, de polimerização dual e reforçado com nanopartículas

Indicações

Restaurações directas e reconstrução de cotos com compósitos de polimerização auto-activada ou dual

Restaurações directas com compósitos, compómeros eOrmocer® fotopolimerizáveis

Cimentação adesiva de espigões com cimentos compósitos de polimerização auto-activada ou dual


Restaurações indirectas, quando utilizados cimentos compósitos de polimerização auto-activada ou dual para a cimentação de inlays, onlays, coroas e pontes

Vantagens

- Polimeriza quimicamente em áreas inacessíveis à luz de polimerização
- Futurabond DC alcança as mesmas propriedades adesivas que os preparados de ataque ácido total, sem prévio condicionamento dos tecidos dentários
- Aplicação universal
- Veja Futurabond NR para mais vantagens

Aprecie a facilidade!

Simple pressão! Simple aplicação!

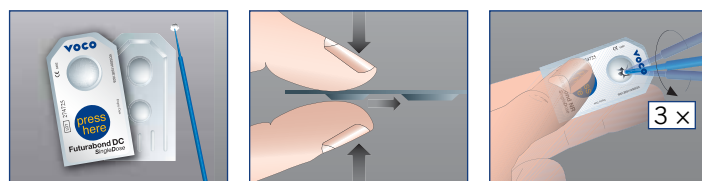

Futurabond DC nas práticas SingleDose

- Fácil, rápido e higiénico
- Não necessita de suportes adicionais
- Não entorna, não escorre



Apresentação

REF 1163 frasco 4 ml líquido 1, frasco 4 ml líquido 2, acessórios

REF 1164 50 SingleDose, acessórios

REF 1165 200 SingleDose, acessórios

Futurabond M



Adesivo monocomponente autocondicionante, fotopolimerizável e reforçado com nanopartículas

Indicações


Restaurações directas de todas as classes, com quaisquer tipos de materiais de restauração fotopolimerizáveis

Vantagens

- Excelente adesão à dentina e ao esmalte
- Aplicação fácil e rápida
 - uma camada, uma fotopolimerização
- Universal, para todos os materiais de restauração fotopolimerizáveis
- Ideal para uso pediátrico

Futurabond M nas práticas SingleDose

- Fácil, rápido e higiénico
- Não necessita de suportes adicionais
- Não entorna, não escorre

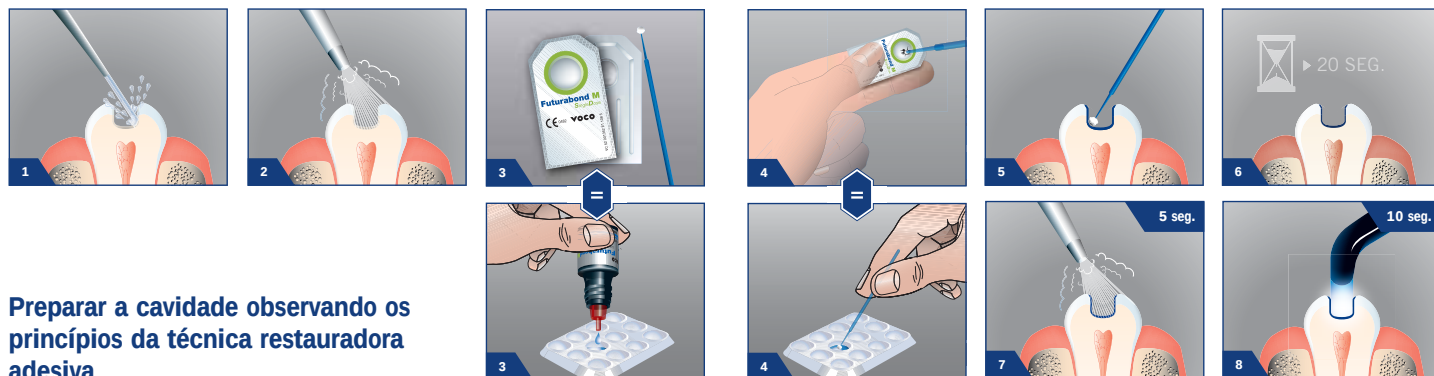

Preparar a cavidade observando os princípios da técnica restauradora adesiva

Apresentação

REF 1350 frasco 5 ml, acessórios
REF 1351 frascos 3 x 5 ml

REF 1352 50 SingleDose, acessórios
REF 1353 200 SingleDose, acessórios

Solobond M



Adesivo monocomponente para dentina e esmalte, fotopolimerizável

Indicações

Restaurações directas de todas as classes, com quaisquer tipos de materiais de restauração fotopolimerizáveis

Vantagens

- Um componente – uma aplicação
- Adesão excelente
- Alta elasticidade e selamento marginal permanente
- O efeito de aderência imediata facilita a colocação do material restaurador
- Universal – para todos os materiais de restauração fotopolimerizáveis

Solobond Plus



Adesivo fotopolimerizável para dentina e esmalte

Indicações

Restaurações directas de todas as classes

Cimentação adesiva de coroas, pontes, inlays, onlays e veneers com cimentos compósitos

Para compósitos auto ou fotopolimerizáveis, bem como de polimerização dual

Vantagens

- Aplicação rápida – poupa tempo
- Pode ser usado com ou sem ataque ácido da dentina
- Sistema de dois componentes otimizado para a dentina e o esmalte
- O efeito de aderência imediata facilita a colocação e a escultura do material restaurador
- Aplicação universal

Apresentação

REF 1225	set com 4 ml frasco, 5 ml Vococid Gel, acessórios
REF 1226	frascos 2 x 4 ml

Apresentação

REF 1044	set com 4 ml primer, 4 ml adesivo, 5 ml Vococid Gel, acessórios
REF 1048	primer 4 ml
REF 1049	adesivo 4 ml



RESTAURAÇÕES INDIRECTAS

Restaurações indirectas – os versáteis materiais da VOCO para a confecção e a cimentação de provisórios e a reconstrução de cotos

A VOCO coloca à sua disposição uma série de produtos para a cimentação de restaurações indirectas, entre os quais cimentos de ionómero de vidro reforçados com resina e sistemas de cimentação à base de compósitos. Diversos materiais de impressão e compósitos de alta estética possibilitam-lhe confeccionar provisórios capazes de satisfazer os mais elevados requisitos. O leque de produtos é complementado por sistemas inteligentes e completos para núcleos e espigões intra-radulares.



Bifix SE



Sistema de cimentação à base de compósito auto-adesivo e de polimerização dual

Indicações

Cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e pontes de porcelana, resina ou metal

Cimentação intra-radicular definitiva de espigões metálicos, cerâmicos ou reforçados com fibras

Vantagens

- Dispensa o ataque ácido e o uso de adesivo
- Rápida presa intra-oral
- Remoção de excessos extremamente fácil
- Grau mínimo de hidrossolubilidade
- Adesão excelente à superfície de quaisquer tipos de restauração, inclusive de zircônia
- Evita erros na mistura
- Biocompatibilidade excelente
- Disponível em três cores



Fácil remoção de excessos na fase de gel.

Curta exposição de cada face à luz do fotopolimerizador por 1 a 2 segundos. De seguida, os excessos na consistência de gel podem ser removidos facilmente com uma cureta ou instrumento semelhante.

Apresentação

- | | |
|----------|--|
| REF 1784 | set com 3 x 5 g seringas QuickMix nas cores universal, transparente e branco-opaco, pontas misturadoras tipo 14, pontas misturadoras tipo 15 (para pontas intra-orais tipo 1), pontas intra-orais tipo 1 |
| REF 1785 | seringa QuickMix 5 g universal (U), 5 pontas misturadoras tipo 15, 5 pontas misturadoras tipo 14, 5 pontas intra-orais tipo 1 |
| REF 1786 | seringa QuickMix 5 g transparente (T), 5 pontas misturadoras tipo 15, 5 pontas misturadoras tipo 14, 5 pontas intra-orais tipo 1 |
| REF 1787 | seringa QuickMix 5 g branco-opaco (WO), 5 pontas misturadoras tipo 15, 5 pontas misturadoras tipo 14, 5 pontas intra-orais tipo 1 |

Bifix QM



Sistema de cimentação universal à base de compósito de polimerização dual

Indicações

Cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas, pontes, pontes Maryland, facetas e espigões

Vantagens

- Para todos os materiais (metais, inlays de compósito e peças em cerâmica, inclusive zircónia)
- Mistura perfeita, sem bolhas de ar
- Aplicação directa
- Adesão excelente à dentina, esmalte e metais
- Adesivo especial para uma óptima adesão à cerâmica
- Radiopaco
- Disponível em três cores
- Pastas Try-In facilitam a selecção de cor antes da cimentação
- Conjunto tudo-em-um

NOVO
Também para peças
em zircónia

Apresentação

REF 1764	Expert set com 3 × 10 g seringas QuickMix nas cores universal, transparente e branco-opaco, pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4, 3 × 1,2 g pasta Try-In nas cores universal, transparente e branco-opaco, cânulas de aplicação tipo 41, 5 ml Ceramic Bond + 50 Futurabond DC <i>SingleDose</i> , acessórios
REF 1760	Triset com 3 × 10 g seringas QuickMix nas cores universal, transparente e branco-opaco, pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4, 3 × 1,2 g pasta Try-In nas cores universal, transparente e branco-opaco, cânulas de aplicação tipo 41, 5 ml Ceramic Bond, acessórios
REF 1761	seringa 1,2 g Bifix QM Try-In universal (U), acessórios
REF 1762	seringa 1,2 g Bifix QM Try-In transparente (T), acessórios
REF 1763	seringa 1,2 g Bifix QM Try-In branco-opaco (WO), acessórios
REF 1217	set com seringa QuickMix 10 g U (universal), 4 ml cada Futurabond DC líquido 1 e líquido 2, 5 ml Ceramic Bond, pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4, acessórios
REF 1218	seringa QuickMix 10 g U (universal), pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4, acessórios
REF 1219	seringa QuickMix 10 g T (transparente), pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4, acessórios
REF 1759	seringa QuickMix 10 g WO (branco-opaco), pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4, acessórios
REF 1106	Ceramic Bond 5 ml

Fit Test C & B



Silicone de adição para verificar a precisão de reconstruções protéticas

Indicações

Verificação da adaptação, do ajuste marginal e de fendas marginais em:

- coroas totais, coroas parciais e pontes
- inlays / onlays
- espigões / falsos-cotos fundidos
- coroas com espigão
- bases metálicas
- coroas e pontes suportadas por implantes
- attachments e outros elementos secundários de próteses

Vantagens

- Rápido exame da adaptação de peças restauradoras
- Seringa QuickMix para manuseamento prático – mistura automática, sem bolhas de ar
- Aplicação directa
- Cor óptima para restaurações de metal e cerâmica
- Resultados rápidos graças ao curto tempo de trabalho e presa

Ceramic Bond



Agente adesivo para unir cerâmica (inclusive zircónia) e compósito

Indicações

Silano adesivo para óptima adesão química entre cerâmicas à base de óxido de alumínio, silicatos ou zircónia e espigões de resina reforçada com fibra de vidro ou materiais compósitos

Vantagens

- Silaniza a superfície de restaurações de cerâmica pura e cria condições ideais para uma adesão duradoura entre cerâmica, inclusive zircónia, e compósito

NOVO
Também para peças
em zircónia

Apresentação

REF 2095 seringa QuickMix 5 ml, pontas misturadoras tipo 9

Apresentação

REF 1106 frasco 5 ml

Meron Plus AC



Ionómero de vidro reforçado com resina para cimentações, em cápsulas de aplicação

Indicações

Cimentação de:

Coroas, pontes de porcelana metalocerâmicas directamente sobre o tecido dentário ou sobre cotos reconstruídos com amálgama, compósito ou cimento de ionómero de vidro

Inlays, onlays, coroas e pontes metálicas

Espigões intra-radulares

Coroas em cerâmica pura à base de silicato, zircónia ou óxido de alumínio

Dispositivos ortodônticos

Vantagens

- Auto-adesivo: adesão segura e rápida sem primer ou condicionador
- Tixotrópico: não escorre, não necessita instrumento rotativo para remoção de excessos
- Especialmente adequado para peças à base de zircónia

Meron Plus



Ionómero de vidro reforçado com resina para cimentações

Indicações

Ver Meron Plus AC

Vantagens

- Excelente adesão à estrutura dentária
- Selamento marginal perfeito
- Resistente à humidade e aos ácidos
- Fase elástica prolongada permite remoção de excessos
- Auto-adesivo: adesão segura e rápida sem primer ou condicionador

Apresentação

REF 1733 48 cápsulas

Apresentação

REF 1731 pó 15 g

REF 1732 líquido 10 ml

Aqua Meron



Ionômero de vidro para cimentações, misturável com água

Indicações

Para a cimentação de coroas, pontes, inlays, onlays, espigões e bandas ortodônticas

Vantagens

- Boa fluidez
- Baixa solubilidade na boca
- Baixa acidez
- Biocompatibilidade

Meron



Ionômero de vidro para cimentações

Indicações

Para a cimentação de coroas, pontes, inlays, onlays, espigões e bandas ortodônticas

Vantagens

- Baixa solubilidade na boca
- Baixa acidez
- Biocompatibilidade

Apresentação

REF 1172 pó 35 g e frasco conta-gotas

Apresentação

REF 1086 pó 35 g, líquido 15 ml
REF 1090 pó 15 g, líquido 7 ml

Rebilda Post




Espigões intra-radulares de resina reforçada com fibra de vidro

Indicações

Espigões intra-radulares para suporte e retenção de restaurações coronárias em casos de estrutura dentária insuficiente

Vantagens

- Comportamento elástico idêntico ao da dentina, elevada resistência à flexão
- Elevada radiopacidade (350% AI)
- Translúcidos
- Forma anatômica
- Cimentação adesiva
- Removível

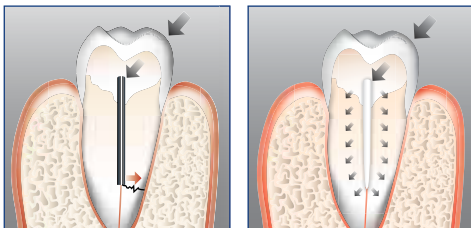

Espigão de metal –
fractura radicular

Rebilda Post –
elasticidade semelhante
à da dentina

Apresentação

REF 1770	Intro Set com 5 espigões de cada $\varnothing$ (1,2 mm; 1,5 mm; 2,0 mm), 1 broca de cada $\varnothing$ (1,2 mm; 1,5 mm; 2,0 mm)
REF 1772	5 espigões, Rebilda Post 12 ($\varnothing$ 1,2 mm)
REF 1773	5 espigões, Rebilda Post 15 ($\varnothing$ 1,5 mm)
REF 1774	5 espigões, Rebilda Post 20 ($\varnothing$ 2,0 mm)
REF 1777	1 broca, Rebilda Post 12 ($\varnothing$ 1,2 mm)
REF 1778	1 broca, Rebilda Post 15 ($\varnothing$ 1,5 mm)
REF 1779	1 broca, Rebilda Post 20 ($\varnothing$ 2,0 mm)


Rebilda Post System



Sistema adesivo de reconstrução de cotos

Vantagens

- Todos os materiais do set concebidos especialmente para uso em conjunto
- Colocação do espigão e reconstrução do coto em um só passo
- **Futurabond DC**
 - Presa segura, autoactivada
 - Forte adesão sem prévio condicionamento ácido
- **Rebilda Post**
 - Comportamento flexural semelhante ao da dentina
 - Alta radiopacidade
- **Rebilda DC**
 - Adequado também para a cimentação
 - Pode ser desgastado como a dentina, óptimas propriedades físicas
 - Baixa temperatura de presa

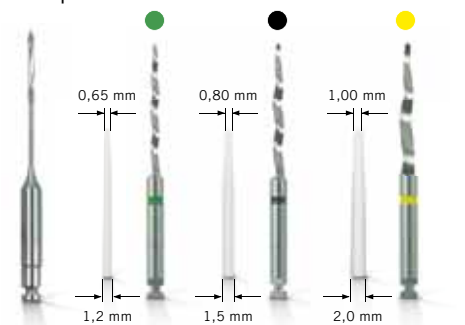

Espigões e brocas
ilustrados em tama-
nho não correspon-
dente ao original

Apresentação

REF 1771	set com 5 espigões de cada $\varnothing$ (1,2 mm; 1,5 mm; 2,0 mm), 1 broca de cada $\varnothing$ (1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm), 1 alargador ($\varnothing$ 0,7 mm), 5 ml Ceramic Bond, 15 Futurabond DC <i>SingleDose</i> , 10 g seringa QuickMix Rebilda DC dentina, acessórios
REF 1769	Reamer (alargador, $\varnothing$ 0,7 mm), 3 unidades

Rebilda DC



Sistema fluido e de dupla polimerização para a reconstrução de cotos e a cimentação de espigões intra-radiculares

Indicações

Reconstrução adesiva de cotos em dentes vitais e não vitais

Cimentação de espigões de resina reforçada com fibras

Cartucho Rebilda DC: agora com 3 x amostras de Endo Tim e 3 amostras de pontas misturadoras tipo 19 para aplicação intra-radicular

Vantagens

- Fotopolimerizável para poupar tempo
- Polimerização química adicional para uma presa segura
- Disponível em seringas QuickMix de 10 g e cartuchos de 50 g
- Disponível em três cores: *azul* para a identificação fácil das margens de preparação; *dentina* para restaurações estéticas; *branco* como contraste estético à dentina
- Pontas misturadoras optimizadas poupam material
- Baixa produção de calor, mesmo na aplicação de grandes quantidades
- Fluido – não precisa de condensação
- Adesão segura com um sistema adesivo
- Aplicação prática com as pontas intra-orais

Apresentação

REF 1395	Intro Set com cartucho 50 g dentina, 4 ml cada Futurabond DC líquido 1 e líquido 2, pontas misturadoras tipo 12, dispensador tipo 3, pontas intra-orais tipo 3, acessórios
REF 1396	cartucho 50 g dentina, pontas misturadoras tipo 12, pontas intra-orais tipo 3
REF 1397	cartucho 50 g azul, pontas misturadoras tipo 12, pontas intra-orais tipo 3
REF 1398	cartucho 50 g branco, pontas misturadoras tipo 12, pontas intra-orais tipo 3

REF 1402	set com seringa QuickMix 10 g dentina, 4 ml cada Futurabond DC líquido 1 e líquido 2, pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4, acessórios
REF 1403	seringa QuickMix 10 g dentina, pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4
REF 1404	seringa QuickMix 10 g azul, pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4
REF 1405	seringa QuickMix 10 g branco, pontas misturadoras tipo 11, pontas intra-orais tipo 4

Rebilda SC



Sistema adesivo fluido e autopolimerizável para a reconstrução de cotos, à base de compósito

Indicações

Reconstrução adesiva de cotos em dentes vitais e não vitais

Vantagens

- Aplicação prática e rápida
- Baixa produção de calor, mesmo na aplicação de grandes quantidades
- Adesão segura com um adesivo – menos pinos dentinários
- Disponível em duas cores: azul e dentina
- Dureza superficial como a do dente – pode ser desgastado como a dentina
- Alta radiopacidade
- Económico com as pontas misturadoras mais curtas

Rebilda LC



Sistema adesivo e fotopolimerizável para a reconstrução de cotos

Indicações

Reconstrução de cotos de menor dimensão

Reconstrução de cantos e vertentes

Construção em camadas

Vantagens

- Não precisa de mistura – poupa tempo
- Fotopolimerizável

Apresentação

- | | |
|----------|--|
| REF 1622 | cartucho 50 g dentina, pontas misturadoras tipo 12 |
| REF 1623 | cartucho 50 g azul, pontas misturadoras tipo 12 |

Apresentação

- | | |
|----------|--------------------------|
| REF 1505 | seringas 2 x 5 g azul |
| REF 1506 | seringas 2 x 5 g dentina |

Structur Premium



Compósito de alta estética para a confecção de coroas e pontes provisórias

Indicações

Confecção de coroas e pontes provisórias de alta estética; utilização universal em coroas, pontes, inlays e onlays provisórias

**FLUORESCÊNCIA
NATURAL**

Vantagens

- A cor especial para incisais possibilita a construção de provisórios em duas camadas
- Estético como a porcelana
- Alta estabilidade de forma e cor
- Fluorescência natural
- Brilho esplêndido
- Dureza igual à do esmalte
- Resistência extremamente alta
- Manipulação perfeita
- Manuseamento eficiente – fácil acabamento e polimento
- Viabilidade de uso dos provisórios por longos prazos
- Especialmente económico em virtude do baixo desperdício

Apresentação

REF 1710	Intro Set com cartucho 75 g A3, dispensador tipo 2, pontas misturadoras tipo 6
REF 1712	cartucho 75 g A1, pontas misturadoras tipo 6
REF 1713	cartucho 75 g A2, pontas misturadoras tipo 6
REF 1714	cartucho 75 g A3, pontas misturadoras tipo 6
REF 1717	cartucho 75 g A3.5, pontas misturadoras tipo 6
REF 1718	cartucho 75 g B1, pontas misturadoras tipo 6
REF 1715	cartucho 75 g B3, pontas misturadoras tipo 6
REF 1716	cartucho 75 g BL, pontas misturadoras tipo 6
REF 1719	embalagem grande com 5 x 75 g cartuchos A3, pontas misturadoras tipo 6

REF 1726	seringa QuickMix 8 g I (Incisal), pontas misturadoras tipo 10
----------	---

Structur 2



Compósito autopolimerizável para a confecção de coroas e pontes provisórias

Indicações

Confecção de coroas, pontes, inlays e onlays provisórias e estéticas

Vantagens

- Passos de trabalho simples e rápidos
- Tempo de presa na cavidade oral de menos de um minuto
- Fácil de esculpir e polir
- Disponível em 8 cores para uma estética natural
- Material provisório de longa duração
- Elevada estabilidade de forma e cor
- Muito económico

**FLUORESCÊNCIA
NATURAL**

Apresentação

REF 1478	Intro Set com cartucho 75 g A3, dispensador tipo 2, pontas misturadoras tipo 6	REF 1309	seringa QuickMix 8 g A1, pontas misturadoras tipo 10
REF 1479	cartucho 75 g A1, pontas misturadoras tipo 6	REF 1310	seringa QuickMix 8 g A2, pontas misturadoras tipo 10
REF 1480	cartucho 75 g A2, pontas misturadoras tipo 6	REF 1311	seringa QuickMix 8 g A3, pontas misturadoras tipo 10
REF 1481	cartucho 75 g A3, pontas misturadoras tipo 6	REF 1312	seringa QuickMix 8 g B1, pontas misturadoras tipo 10
REF 1490	cartucho 75 g A3.5, pontas misturadoras tipo 6		
REF 1482	cartucho 75 g B1, pontas misturadoras tipo 6		
REF 1483	cartucho 75 g B3, pontas misturadoras tipo 6		
REF 1486	cartucho 75 g C2, pontas misturadoras tipo 6		
REF 1485	cartucho 75 g BL, pontas misturadoras tipo 6		
REF 1492	embalagem grande com 5 x 75 g cartuchos A2, pontas misturadoras tipo 6		
REF 1491	embalagem grande com 5 x 75 g cartuchos A3, pontas misturadoras tipo 6		

Provicol QM



Cimento de fixação provisória com hidróxido de cálcio, sem eugenol

Indicações

Cimentação temporária de inlays, onlays, coroas, coroas parciais, pontes, attachments e espigões

Restauração provisória de cavidades pequenas

Vantagens

- Aplicação rápida
- Mistura perfeita, sem bolhas de ar
- Aplicação directa
- Mais vantagens: ver Provicol C

Provicol C



O comprovado Provicol na versão de cartuchos

Indicações

Ver Provicol QM

Vantagens

- Propriedades semi-elásticas para a adesão segura do provisório
- Sem eugenol, baixo potencial alergênico
- Hidróxido de cálcio
 - estimula a formação de dentina secundária
 - efeito bacteriostático
- Ideal para uso antes da cimentação adesiva com cimentos compósitos – não interfere na reacção de presa dos materiais de restauração ou cimentação à base de resina

Provicol



O comprovado Provicol na versão de mistura manual

Indicações

Ver Provicol QM

Vantagens

Ver Provicol C

Apresentação

REF 1074 seringa QuickMix 5 ml, pontas misturadoras tipo 10

Apresentação

REF 1076 cartuchos 2 x 65 g, pontas misturadoras tipo 6
REF 1077 cartucho 65 g, pontas misturadoras tipo 6

Apresentação

REF 1075 base 25 g, catalisador 25 g
REF 1078 embalagem gigante com 5 x 2 tubos 25 g de base e catalisador

Clip



Material restaurador monocomponente fotopolimerizável para restaurações provisórias

Indicações

Todos os tipos de restaurações provisórias

Selamento provisório de cavidades, sobretudo na técnica inlay / onlay

Vantagens

- Fácil de aplicar – fácil de remover numa peça só
- Não danifica as margens dos preparos
- Poupa tempo, pois é fotopolimerizável
- Boa resistência e bom selamento marginal
- Particularmente vantajoso no uso da técnica inlay / onlay



Fácil remoção numa peça só.

Fonte: Dr. Bastobbe, Mainleus

Clip F



Material restaurador monocomponente fotopolimerizável, com flúor, para restaurações provisórias

Indicações

Todos os tipos de restaurações provisórias

Selamento provisório de cavidades, sobretudo na técnica inlay / onlay

Vantagens

- Fácil de aplicar – fácil de remover numa peça só
- Não danifica as margens dos preparos
- Poupa tempo, pois é fotopolimerizável
- Boa resistência e bom selamento marginal
- Particularmente vantajoso no uso da técnica inlay / onlay

Apresentação

REF 1284	seringas 2 x 4 g
REF 1285	seringas em Tripack 3 x 4 g
REF 1287	Caps 25 x 0,25 g
REF 9301	1 Caps Dispenser

Apresentação

REF 1289	seringas 2 x 4 g
REF 1283	seringas em Tripack 3 x 4 g

Ufi Gel hard C



Material de rebasamento duro imediato

Indicações

Rebasamentos duros e permanentes
 Rebasamentos directos e indirectos
 Rebasamentos totais ou parciais
 Rebasamentos realizados no consultório
 Prolongamento das margens de próteses
 Reparação e alargamento de próteses
 Correção de próteses novas


Ufi Gel hard



Versão pó / líquido, para mistura manual, do Ufi Gel hard C

Vantagens

- Rebasamento duro completo numa só consulta
- Sem metilmetacrilato
- Sabor e odor neutros
- Nenhuma produção de calor na boca
- Boa estabilidade de cor
- Tão fácil como fazer uma impressão
- Resultado estético, boa aceitação pelo paciente e conforto
- Superfície lisa
- Novas camadas podem ser adicionadas a qualquer momento

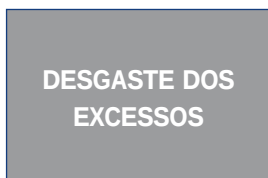

Apresentação

REF 2215 set com cartucho 80 g, 10 ml adesivo, pontas misturadoras tipo 8
 REF 2218 Intro Set com cartucho 80 g, dispensador tipo 2, 10 ml adesivo, pontas misturadoras tipo 8
 REF 2216 cartucho 80 g, pontas misturadoras tipo 8
 REF 2217 adesivo 10 ml

Apresentação

REF 2210 set com 60 g de pó, 40 ml líquido, 20 ml condicionador, acessórios
 REF 2211 pó 60 g
 REF 2212 líquido 40 ml
 REF 2213 condicionador 20 ml

Ufi Gel SC



Material de rebasamento macio à base de silicone, de cura a frio, em cartuchos

Indicações

Material para rebasamentos moles permanentes para próteses totais e parciais

Tratamento de pontos de irritação mecânica

Vedação da linha vibrátil em casos de cristas alveolares flácidas e má retenção

Revestimento macio para processos alveolares irregulares

Auxilia os processos de cicatrização na implantologia e nas inflamações em mucosa ou osso alveolar



**COLOCAÇÃO DA
PRÓTESE E
MOVIMENTOS
MANDIBULARES**



Ufi Gel P



Material de rebasamento macio à base de silicone, de cura a frio, em tubos

Vantagens

- Silicone de rebasamento de alta qualidade
- Rebasamento completo numa só consulta
- Permanentemente mole
- Adesivo especial proporciona forte adesão do silicone à prótese
- Prático e económico
- Biocompatível (sem metacrilato)
- Sabor e odor neutros
- Cor estética e estável, com efeito camaleão
- Em laboratório: menos passos de trabalho em comparação a outros materiais de cura a frio
- Para todas as próteses à base de PMMA
- Utilização fácil e rápida em rebasamentos directos e indirectos
- Adapta-se excelentemente a todos os detalhes para uma adaptação precisa da prótese
- Resistente aos agentes convencionais de limpeza de próteses

Apresentação

REF 2041	set com cartucho 50 ml, 10 ml adesivo, 10 ml glaze base, 10 ml glaze catalisador, pontas misturadoras tipo 8
REF 2040	cartucho 50 ml, pontas misturadoras tipo 8
REF 2029	adesivo 10 ml
REF 2047	glaze 20 ml
REF 2049	discos de polimento, 10 unidades

Apresentação

REF 2070	set com 50 ml base, 50 ml catalisador, 10 ml glaze base, 10 ml glaze catalisador, 10 ml adesivo, acessórios
REF 2071	base 50 ml, catalisador 50 ml
REF 2076	adesivo 10 ml
REF 2077	glaze 20 ml

Cimara



Material à base de compósito fotopolimerizável para reparações de cerâmica

Indicações

Reparação directa de peças protéticas em cerâmica

Vantagens

- Reparações em apenas uma sessão
- Não é necessário remover ou recimentar peças protéticas
- Passos de trabalho simples
- Não requer aparelhos adicionais
- Adesão permanente do compósito à porcelana
- Elevada resistência ao cisalhamento

**REPARAÇÃO DIRECTA
INTRA-ORAL,
SEM ATAQUE ÁCIDO**



Apresentação

- | | |
|----------|---|
| REF 1196 | set com 8 x 0,3 ml silano adesivo, 4 ml adesivo, seringa 1,2 g opaco LC, 8 x 0,25 g Grandio®SO Caps (A1, 2 x A2, 2 x A3, ^{vc} A3.25, A3.5, B2), acessórios |
| REF 1197 | silano adesivo 4 x 0,3 ml, acessórios |
| REF 1198 | adesivo 4 ml |
| REF 1575 | seringa 1,2 g opaco LC, cânulas de aplicação tipo 45 |

Cimara Zircon



Material para reparação de zircónia com compósito fotopolimerizável

Indicações

Reparação de defeitos em restaurações protéticas em cerâmica pura ou com infra-estrutura em zircónia utilizando compósito

Vantagens

- Alto grau de adesão
- Elevada estética
- Económico: reparação imediata na boca do paciente
- Dispensa condicionamento ácido
- Inclui o compósito nano-híbrido e fotopolimerizável Grandio®SO, proporcionando excelentes resultados



Apresentação

- REF 1421 set com 5 ml primer, 4 ml adesivo, 8 x 0,25 g Grandio®SO Caps (A1, 2 x A2, 2 x A3, ^{vc}A3.25, A3.5, B2), acessórios
- REF 1422 frasco primer 5 ml

Contrast putty / putty soft



Material de impressão à base de silicone de adição

Indicações

- Contrast putty:** para a impressão inicial na técnica de correcção
- Contrast putty soft:** impressões totais ou parciais usando a técnica de impressão dupla ou “sanduíche”

Vantagens

- Reprodução precisa dos pormenores mais pequenos
- Tolerante à humidade
- Elevada capacidade de reprodução
- Elasticidade óptima
- Altíssima dureza final

Contrast medium / light regular / light fast



Material de impressão à base de silicone de adição, em cartuchos

Indicações

Três materiais com viscosidades, tempos de trabalho e tempos de presa diferentes:

- Contrast medium:** material de correcção universal para todas as técnicas de impressão e para a impressão de arcadas desdentadas
- Contrast light regular:** material de correcção fluido com tempo de presa regular, recomendado para impressões mais extensas
- Contrast light fast:** material de correcção fluido com curto tempo de presa

Vantagens

- Ver Contrast putty / putty soft

Apresentação

- REF 2081 Contrast putty 900 ml
- REF 2085 Contrast putty soft 900 ml

Apresentação

- REF 2084 **medium**, cartuchos 2 x 50 ml, pontas misturadoras tipo 7, pontas intra-orais tipo 3
- REF 2087 **light regular**, cartuchos 2 x 50 ml, pontas misturadoras tipo 7, pontas intra-orais tipo 3
- REF 2088 **light fast**, cartuchos 2 x 50 ml, pontas misturadoras tipo 7, pontas intra-orais tipo 3

Registrado X-tra



Silicone de adição para registros de mordida, extra duro e de presa rápida

Indicações

Registos de mordida
Fixação de registos com arco facial
Fixação de registos com pino de apoio
Confecção de modelos para restaurações de compósito indirectas

Vantagens

- Dureza ideal
- Permite aplicação sem pressão exercida pelo tempo
- Consistência firme
- Propriedades tixotrópicas muito boas
- Pode ser desgastado com instrumentos rotativos
- Registos muito precisos
- Com pontas misturadoras económicas



Apresentação

- REF 2035 cartuchos 2 x 50 ml, pontas misturadoras tipo 16, pontas intra-orais tipo 2
- REF 2036 embalagem grande com cartuchos 8 x 50 ml, pontas misturadoras tipo 16, pontas intra-orais tipo 2

Individo Lux



Moldeiras individuais pré-moldadas, fotopolimerizáveis

Indicações

Para a confecção de moldeiras individuais utilizando placas pré-moldadas para arcadas superiores e inferiores

Vantagens

- Nas cores azul transparente e azul opaco
- Propicia um trabalho preciso e económico
- Moldeiras estáveis e resistentes
- Sabor agradável a hortelã
- Consistência não pegajosa
- Fotopolimerizável com luz de halogéneo normal (p. ex. Individo Light Box) ou luz ultravioleta

Apresentação

- REF 2402 placas azul opaco, 50 unidades arcada superior
- REF 2403 placas azul opaco, 50 unidades arcada inferior
- REF 2408 placas azul transparente, 50 unidades arcada superior
- REF 2409 placas azul transparente, 50 unidades arcada inferior

Profibase



Moldeiras / placas pré-moldadas de resina rosa-transparente fotopolimerizável

Indicações

Base acrílica na cor da gengiva para montagens em cera de próteses totais e parciais

Vantagens

- Cor da gengiva
- Podem ser conformadas com as mãos de maneira fácil e rápida
- Estabilidade permanente e resistência à compressão
- Sabor agradável a hortelã
- Consistência não pegajosa
- Fotopolimerizável com luz de halogéneo normal (p. ex. Individo Light Box) ou luz ultravioleta

Apresentação

- REF 2111 25 placas arcada superior, 25 placas arcada inferior
- REF 2112 50 placas arcada superior
- REF 2113 50 placas arcada inferior

Quick Up



Material autopolimerizável para a fixação de attachments e elementos secundários de próteses

Indicações

Compósito da cor da gengiva para fixar attachments (componentes fêmeas), como encaixes de bola, Locator® ou telescópicos, em próteses com base em resina

Refixação de elementos secundários em próteses com base em resina, como p. ex. cliques para barras

Locator® não é uma marca comercial registada da VOCO GmbH.

Vantagens

- Fácil aplicação directa
- Elevado grau de resistência
- Set completo para a utilização imediata, incluindo material para verificação e preenchimento de áreas retentivas em estruturas primárias a serem protegidas, como p. ex. implantes
- Combinação ideal de um material de fixação autopolimerizável com um material de correcção fotopolimerizável



Attachments (fêmeas) posicionados sobre os implantes



Base da prótese com cavidades para alojar os attachments



Verificação do espaço com Fit Test C & B



Verificação do assentamento dos attachments com Fit Test C & B



Preenchimento de retenções e recobrimento dos elementos primários e da gengiva com Fit Test C & B



Aplicação de Quick Up com a seringa QuickMix



Aplicação de Quick Up LC para corrigir falhas ou defeitos superficiais



Attachments fixados na prótese

Apresentação

- REF 1625 set com 7,5 g seringa QuickMix, 2 g seringa Quick Up LC, 4 ml adesivo, seringa QuickMix 5 ml Fit Test C & B, acessórios
- REF 1626 seringa QuickMix 7,5 g, acessórios



PRODUTOS DIVERSOS

Produtos e aparelhos de laboratório úteis no dia-a-dia da clínica.

A VOCO facilita o seu trabalho no consultório com uma vasta série de produtos, como por exemplo cânulas em diferentes formatos para simplificar ao máximo a aplicação de diferentes materiais. Ao lado destes artigos, também se encontram todos os aparelhos e pequenos dispositivos necessários para a utilização de diversos produtos da VOCO. Por fim, também colocamos à sua disposição materiais de limpeza e outros produtos de imprescindível utilidade no laboratório e na clínica.

Celalux 2



Fotopolimerizador com LED de alta potência

Vantagens

- Moderna tecnologia LED com alta intensidade de luz (aprox. 1.000 mW/m²),
- 3 tempos de exposição, inclusive função Softstart
- Fácil de usar, sem fios
- Design ergonómico, a peça de mão pesa apenas 160 g
- Guia de luz angulado, cor âmbar, pode ser autoclavado e trocado
- Intervalo de comprimento de onda: 420 – 480 nm
- Polimerização de todos os materiais dentários fotoactivados à base de canforoquinona (bondings / adesivos, compósitos,Ormocer®, compómeros)
- Tempo de operação com a bateria totalmente carregada: pelo menos 300 × 20 s (100 min)
- Bateria fácil de trocar
- Bateria recarregável

Apresentação

REF 9080 Celalux 2 (peça de mão com capa protectora e LED, carregador de bateria com wattímetro, adaptador de corrente, bateria de iões de lítio, guia de luz de cor âmbar, ø 7,5 mm, angulado a 45°, 2 protectores oculares, manual do utilizador)

Acessórios

REF 9081 guia de luz angulado a 45°, ø 7,5 mm, cor âmbar, esterilizável
REF 9082 base do aparelho, inclusive bateria de iões de lítio recarregável, capacidade: 2000 mAh
REF 9083 protector antiofuscamento para o guia de luz ø 7,5 mm, 5 unidades
REF 9084 guia de luz angulado a 45°, ø 7,5 mm, branco, com alta intensidade de luz (ca. 1.500 mW/cm²), esterilizável

Individo Light Box



Fotopolimerizador com luz de halogéneo

Vantagens

- Polimerização completa na câmara especialmente concebida
- Dois tempos de operação (3 e 5 minutos) para polimerização individual
- Gaveta espaçosa para polimerização simultânea de 4 modelos
- Abertura grande para modelos altos
- Luz azul homogénea no espectro de 400 – 500 nm
- Capacidade: 36 W (4 x 9 W), 220 V/50 Hz

VOCO Mix 10



Misturador para cápsulas de mistura e aplicação VOCO, para cápsulas de amálgama e outras semelhantes

Vantagens

- Desenho robusto
- Baixo nível de ruído e de vibração
- Tempos de mistura reguláveis entre 1 e 99 segundos
- Visor grande
- Frequência de mistura: 4.300 oscilações/min. +/- 5 %

Apresentação

REF 9030 aparelho completo com 4 lâmpadas
REF 9031 lâmpada de recarga

Apresentação

REF 9048 1 aparelho (220 – 240 V)
REF 9049 1 aparelho (110 V)

Traypurol tabs



Pastilhas activas para limpeza de moldeiras e instrumentos

Indicações

Para a limpeza de moldeiras e instrumentos

Vantagens

- Remove alginato e cimentos em pouco tempo
- Especialmente fácil de usar
- Não necessita agitar – as pastilhas dissolvem-se na água por si só
- Não agride os materiais – adequado para todos os metais inoxidáveis (incluindo alumínio) e plásticos
- Biodegradável e pH neutro
- Pode utilizar-se em banhos ultra-sónicos

Fácil utilização!



Apresentação

REF 2281 50 pastilhas

Traypurol



Concentrado de limpeza para moldeiras e instrumentos

Indicações

Para a limpeza de moldeiras e instrumentos

Vantagens

- Dilui-se simplesmente com água
- Remove os resíduos de alginato e cimentos de óxido de zinco e eugenol, ionómero de vidro, carboxilato e fosfato
- Limpa moldeiras e instrumentos durante a noite
- Pode utilizar-se em banhos ultra-sónicos
- Utilizável em todos os metais não oxidantes e plásticos
- Biodegradável, não agride os instrumentos

Solvitan



Agente de limpeza com cheiro a frutos cítricos

Indicações

Solução de limpeza para uso geral em clínicas dentárias, laboratórios e no lar

Vantagens

- Remove as pastas e materiais de impressão à base de silicone e poliéter, bem como óxido de zinco e eugenol das mãos e instrumentos
- Contém lanolina para proteger a pele
- Remove-se facilmente com água
- Cheiro a frutos cítricos agradável

Apresentação

REF 2312 frasco 250 ml
REF 2313 caixa com 4 frascos de 250 ml
REF 2320 frasco 500 ml

Vococid



Condicionador para técnica do ataque ácido (contém ácido fosfórico 34,9%)

Indicações

Ataque ácido do esmalte e dentina na técnica “etch-bond”

Vantagens

- Contém 34,9% de ácido ortofosfórico
- Cor azul para controlo visual
- Gel consistente – não escorre
- Também disponível como líquido

Depulpin



(Imagem meramente ilustrativa)

Pasta para desvitalização

Indicações

Desvitalização da polpa antes da extirpação ou amputação
Desvitalização residual após remoção de tecido pulpar não-vital

Vantagens

- Sem arsénico
- Desvitalização e mumificação seguras
- Desinfecção
- Cor azul para controlo visual
- Rápido alívio da dor
- Também eficaz em casos de inflamação pulpar
- Aplicação fácil usando a seringa com êmbolo rosqueável

Apresentação

REF 1063 seringa 5 ml gel, cânulas de aplicação tipo 42
REF 1066 frascos 2 x 3 ml

Apresentação

REF 1281 seringa 3 g

Canason



Cimento de óxido de zinco e eugenol para a obturação de canais radiculares

Indicações

Obturação do canal radicular preparado

Vantagens

- Antibacteriano, anti-séptico e anti-inflamatório
- Fácil de misturar
- Selamento estanque
- Radiopaco
- Não reabsorvível

Caries Marker



Corante para revelação de cárie na dentina

Indicações

Revelação de cárie dentinária para simplificar a preparação de cavidades e para uso didático

Vantagens

- Indica precisamente os limites entre a cárie e a dentina hígida
- Auxilia técnicas de restauração minimamente invasivas
- Adequado para ações de formação com dentes extraídos

Apresentação

REF 1250 pó 30 g, líquido 20 ml
REF 1253 pó 15 g
REF 1254 líquido 10 ml

Apresentação

REF 1005 frascos 2 x 3 ml, acessórios

Pele Tím



Bolinhas de espuma para aplicar produtos líquidos ou em pasta sem pressão

Indicações

Utilização em alvéolos infectados

Endodrenagem


Teste de vitalidade

Remoção de excessos de cimento e materiais de selamento

Aplicação tópica de preparados com flúor, por exemplo

Vantagens

- 5 tamanhos diferentes
- Aplicação sem dor e sem pressão
- Aplicação económica
- Aplicação higiénica sem cotão

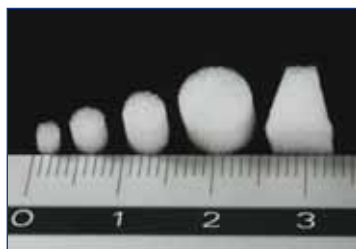

Pele Tím: Tamanhos e formas disponíveis

Block Out Gel LC



Gel espaçador fotopolimerizável

Indicações

Cobrir áreas retentivas de modelos de gesso

Vantagens

- Cor azul facilita o controlo da aplicação
- Aplicação fácil directamente da seringa

Apresentação

REF 2250	n.º 0, mini, Ø 3 mm, aprox. 3.000 un.
REF 2252	n.º 1, pequeno, Ø 4 mm, aprox. 3.000 un.
REF 2253	n.º 2, médio, Ø 5 mm, aprox. 1.000 un.
REF 2254	n.º 3, grande, Ø 8 mm, aprox. 500 un.
REF 2255	n.º 4, forma de cunha, Ø 8 mm, aprox. 500 un.

Apresentação

REF 1661	seringas 4 x 1,2 ml de Block Out Gel LC, cânulas de aplicação tipo 44
----------	---

Rebilda Form



Matrizes para a reconstrução adesiva de cotos

Indicações

Matrizes especiais para a reconstrução de cotos com ou sem espigão intra-radicular, em dentes com grande destruição

Vantagens

- Utilização simples com todos os materiais de reconstrução à base de compósito
- Três tamanhos diferentes
- Permite a passagem de luz para a fotopolimerização
- Rápida adaptação ao dente graças à sua forma especial
- Não se une quimicamente com os materiais à base de compósito convencionais



Apresentação

REF 1407	20 unidades, pequena
REF 1408	20 unidades, média
REF 1409	20 unidades, grande

Dimanto®



Polidores diamantados para o polimento preliminar e de alto brilho de restaurações em compósito

Indicações

Sistema de passo único para o polimento preliminar e de alto brilho após o acabamento de restaurações em compósito

Vantagens

- Proporciona um ótimo polimento
- Indicado para todos os tipos de compósito – também os de última geração
- Impregnado de partículas de diamante para um polimento eficiente
- Instrumental reduzido: polimento preliminar e de alto brilho com um só polidor
- Autoclavável, pode ser reutilizado
- Cinco formas diferentes, para um polimento preciso e individualizado
- Pode ser utilizado com ou sem refrigeração a água



Apresentação

REF 2380	set com 5 unidades sortidas (1 × cada forma: chama pequena, chama grande, taça pequena, taça grande, lentilha)
REF 2381	chama pequena (10 unidades)
REF 2382	chama grande (10 unidades)
REF 2383	taça pequena (10 unidades)
REF 2384	taça grande (10 unidades)
REF 2385	lentilha (10 unidades)

Caps Dispenser



Dispensador para a aplicação directa de materiais restauradores em cápsulas

Para aplicar, p. ex., Clip Caps, Arabesk Top Caps, Arabesk Flow Caps, Admira Caps, Admira Flow Caps, Twinky Star, Glasiosite Caps, Grandio® Caps, Grandio® Flow Caps, x-tra fil Caps, Amaris® Caps, Grandio®SO Caps, Grandio®SO Heavy Flow Caps e Grandio®SO Flow Caps

Apresentação

REF 9301 1 Caps Dispenser

Dispensador tipo 2



Dispensador para aplicar materiais dentários em cartuchos

Para cartuchos 1 : 1 ou 1 : 2 (50 ml), p. ex. para Registrado X-tra, Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, Structur 2 SC, Structur Premium, Provicol C, Contrast, etc.

Apresentação

REF 2158 1 dispensador tipo 2

Dispensador tipo 3



Dispensador para aplicar materiais dentários em cartuchos

Para cartuchos 1 : 1 ou 1 : 2 (25 ml), p. ex. para Rebilda SC, Rebilda DC, etc.

Apresentação

REF 2259 1 dispensador tipo 3

AC Activator



Dispositivo de activação das cápsulas de aplicação VOCO (AC)

Apresentação

REF 9300 1 AC Activator

AC Applicator



Aplicador tipo fórceps para a aplicação directa do conteúdo de cápsulas de aplicação (AC) da VOCO na cavidade

Apresentação

REF 2331 1 AC Applicator

Cânulas de aplicação



REF 2145

cânulas de aplicação tipo 40 para Fissurit F/FX, 100 unidades



REF 2146

cânulas de aplicação tipo 41 para Iono-seal, Calcimol LC, Grandio®/SO Flow, Bifix QM Try-In, LC Dam, 100 unidades



REF 2310

cânulas de aplicação tipo 42 para Vococid, Calcicur, 30 unidades



REF 2144

cânulas de aplicação tipo 44 para Admira Flow, Amaris® Flow, Arabesk Flow, Block Out Gel LC, Quick Up LC, 100 unidades



REF 2147

cânulas de aplicação tipo 45 para Amaris® Gingiva, Grandio® Seal, Cimara Opaker LC, 100 unidades



REF 2148

cânulas de aplicação tipo 46 para Grandio®SO Heavy Flow, 100 unidades

Pontas misturadoras



REF 2185

pontas misturadoras tipo 6 para Provicol C, Structur 2 SC, Structur Premium, 50 unidades



REF 2186

pontas misturadoras tipo 7 para Contrast medium, Contrast light, 50 unidades



REF 2187

pontas misturadoras tipo 8 para Ufi Gel SC, Ufi Gel hard C, 50 unidades



REF 2188

pontas misturadoras tipo 9 para Fit Test C & B, 50 unidades



REF 2189

pontas misturadoras tipo 10 para Provicol QM, Structur 2 QM, Structur Premium QM, Quick Up, 50 unidades



REF 2191

pontas misturadoras tipo 11 para Rebilda DC na seringa QuickMix, Bifix QM, Fit Test C & B apenas com REF 2139, 50 unidades



REF 2192

pontas misturadoras tipo 12 para Rebilda DC em cartuchos, Rebilda SC, 50 unidades



REF 2194

pontas misturadoras tipo 14 para Bifix SE, Perfect Bleach Office, 50 unidades



REF 2195

pontas misturadoras tipo 15 (com pontas intra-orais tipo 1), para Bifix SE, Perfect Bleach Office, 50 unidades



REF 2196

pontas misturadoras tipo 16 (para pontas intra-orais tipo 2), para Registrado X-tra, 50 unidades



REF 2199

pontas misturadoras tipo 19 para Rebilda DC em cartuchos, flexíveis, 30 unidades

Pontas intra-orais / Espátula de mistura / Blocos de mistura



REF 2139

pontas intra-orais tipo 1 para Perfect Bleach Office, para aplicação no canal radicular quando utilizado Rebilda DC na seringa QuickMix, Bifix SE, Bifix QM, 50 unidades



REF 2140

pontas intra-orais tipo 2 para Registrado X-tra, 50 unidades



REF 2141

pontas intra-orais tipo 3 para Rebilda SC, Rebilda DC em cartuchos, Contrast medium, Contrast light, 50 unidades



REF 2142

pontas intra-orais tipo 4 para Rebilda DC na seringa QuickMix, Bifix QM, Perfect Bleach Office, 50 unidades




REF 2168

espátula de mistura VOCO para cimentos, 20 unidades



REF 2314

espátula de mistura VOCO para compósitos, 100 unidades

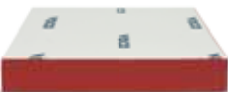

REF 2303

blocos de mistura 70 x 80 mm, com verso aderente, 4 unidades

Outros produtos auxiliares



REF 2169

VOCO instrumento Trifill, 10 unidades



REF 2249

Micro Tim pincéis de aplicação finos, 100 unidades



REF 2309

pincéis descartáveis, 100 unidades



REF 2338

porta-pincel para pincéis descartáveis VOCO e Micro Tim, 5 unidades



REF 2247

Single Tim pincéis de aplicação para Futurabond M / NR / DC *SingleDose*, 100 unidades



REF 2246

Endo Tim, pincéis de aplicação, para utilização no canal radicular, 50 unidades



REF 2245

Easy Brush, pincéis de aplicação, 50 unidades

A			
AC Activator	76	Cimara	62
AC Applicator	76	Cimara Zircon	63
Admira	34	Clip	59
Admira Bond	35	Clip F	59
Admira Flow	35	Contrast medium/light	64
Admira Protect	6	Contrast putty/putty soft	64
Alfacomp	33	Curvy	31
Amalgam Liner	19	D	
Amaris	20/21	Depulpin	71
Amaris Flow	21	Dimanto	75
Amaris Gingiva	22	Dispensador	76
Aqua Ionofil Plus	40	E	
Aqua Meron	52	Easy Glaze	39
Arabesk	33	F	
Arabesk Flow	32	Final Varnish LC	41
Arabesk Top	32	Fissurit	10
Argion	41	Fissurit F	10
Argion Molar AC	41	Fissurit FX	10
Artigos descartáveis	77/78	Fit Test C & B	50
B		Futurabond DC	43
Bifix QM	49	Futurabond M	44
Bifix SE	48	Futurabond NR	42
Bifluorid 10	8	G	
Block Out Gel LC	73	Glasiosite	36
C		Grandio	28/29
Calcicur	18	Grandio Flow	30
Calcimol	18	Grandio Seal	11
Calcimol LC	18	GrandioSO	24
Canason	72	GrandioSO Flow	25
Caps Dispenser	76	GrandioSO Heavy Flow	26
Caries Marker	72	GrandTEC	27
Celalux 2	68	I	
Ceramic Bond	50	Individo Light Box	69
		Individo Lux	65
		Ionobond	19
		Ionofil Plus	40
		Ionofil Plus AC	40
		Ionolux	37
		Ionoseal	19
		K	
		Klint	9
		M	
		Meron	52
		Meron Plus	51
		Meron Plus AC	51
		P	
		Pele Tim	73
		Perfect Bleach 10% / 17%	15
		Perfect Bleach Office	14
		Polofil Supra	33
		Profibase	65
		Provicol	58
		Provicol C	58
		Provicol QM	58
		Q	
		Quick Up	66
		R	
		Rebilda DC	54
		Rebilda Form	74
		Rebilda LC	55
		Rebilda Post	53
		Rebilda Post System	53
		Rebilda SC	55
		Registrado X-tra	65
		Remin Pro	13
		S	
		Solobond M	45
		Solobond Plus	45
		Solvente	9
		Solvitan	70
		Structur 2	57
		Structur Premium	56
		T	
		Traypurol	70
		Traypurol tabs	70
		Twinky Star	36
		U	
		Ufi Gel hard	60
		Ufi Gel hard C	60
		Ufi Gel P	61
		Ufi Gel SC	61
		V	
		Vocacid	71
		VOCO Ionofil Molar	38
		VOCO Ionofil Molar AC	38
		VOCO Ionofil Molar AC Quick	39
		VOCO Mix 10	69
		VOCO Profluorid Varnish	7
		X	
		x-tra fil	23

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Alemanha

Tel.: +49 (0)4721-719-0
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com · www.voco.com